

Bedienungsanleitung

Sharky Pro


Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorschriften	5	Verstellung seitlichen Winkel.....	23
		Bezug.....	23
Kopfstütze	7	Armlehnen von hinten befestigt	25
Montage der Kopfstützenhalterung.....	7	Montage von festen Armlehnen.....	25
Befestigung der Kopfstütze	7	Höhenverstellung der Armauflage.....	25
Höheneinstellung der Kopfstütze	7	Breitenverstellung	25
Anpassung der Kopfstütze.....	7	Winkelverstellung der Armauflage	25
Befestigen der Halterung für das Stirnband.....	7	Verstellung des seitlichen Winkels	25
		Bezug.....	25
Rückenlehne	9	Armlehnen von hinten befestigt, faltbar	27
Einstellung der Rückenlehne	9	Montage von festen Armlehnen.....	27
Verstellung der Rückenhöhe.....	9	Höhenverstellung der Armauflage.....	27
Winklereinstellung der Rückenlehne.....	9	Breitenverstellung	27
Einstellung der Thoraxanlage	9	Winkelverstellung der Armauflage.....	27
Einstellen der Lumbal Stütze.....	9	Verstellung seitlichen Winkel.....	27
		Die Faltungs-Funktion	27
Thoraxanlage	11	Montage des Fixierungswestes	29
Montage der Thoraxanlage	11	Montage des unteren Montagewinkels.....	29
Abklappbare Thoraxanlage	11	Einstellen der unteren Montagewinkel.....	29
Verstärkte Thoraxanlage	11	Montage der oberen Halterung.....	29
		Einstellen der oberen Halterung	29
Sitzeinheit	13	Alternative Montage der unteren Halterungen ...	29
Einstellung der Sitzbreite.....	13	Schiebebügel	31
Beinlängendifferenz.....	15	Schiebebügel	31
Sitzneigungsverstellung	15	Einstellen der Höhe	31
Abduktion, Adduktion und Windswept	15		
Heizung	16	Oberarm Stütze	33
Heizung.....	16	Montage der Oberarm-Stütze.....	33
Batterie.....	16	Einstellen der Höhe	33
		Breite einstellen.....	33
Beckenanlage	19	Kissenbezug	33
Befestigung der Beckenanlage.....	19	Tisch, fixiert	35
Anpassung der Beckenanlage.....	19	Montage des Tisches.....	35
Beckengurt	21	Änderung die Befestigungslöcher.....	35
Anpassung des Beckengurtes.....	21	Tisch, faltbar	37
Befestigung des Gurtes	21	Montage des Tisches	37
		Nutzung der Faltfunktion	37
Armlehnen vom Sitz	23		
Befestigung der Armlehnen	23		
Breitenverstellung.....	23		
Höhenverstellung der Armauflage	23		
Winkelverstellung der Armauflage	23		


Tisch, verstärkte Halterungen	39
Montage des verstärkten Tisches.....	39
Breite einstellen	39
Waden Stütze	41
Montage der Wadenstütze.....	41
Einstellen der Höhe.....	41
Breite einstellen	41
Fußstütze	43
Montage der Fußstütze	43
Alternative Befestigung der Fußstütze	43
Sicherheitssperre	43
Einstellen des Winkels des Kniegelenks.....	43
Einstellen des Winkels am Knöchel.....	43
Fußstütze Klammern	45
Feste Fußstützen-Halterung.....	45
Flexible Fußstützen Halterung	45
Turn-up Fußstützenaufnahme.....	45
Kugelgelenk Halterung.....	45
Flacher Sitz	47
Montage des flachen Sitz	47
Montage eines Sitzsystem auf einem Rahmen	49
Montage auf einem Rahmen.....	49
Montage mit einem Adapter-System	51
Transport in einem Fahrzeug	52
Richtlinien für den Transport in einem Auto....	52
Crashtest geprüft und zugelassen	52

Kundendienst	53
Pflegeanleitung	54
Wartungsintervalle.....	54
Reinigungs- und Pflegehinweise.....	54
Der Gas Kolben muss regelmäßig aktiviert werden.....	54
Werkzeuge.....	54
Garantie	55
Kombinationen	55
Ersatzteile.....	55
Abänderungen	55
Kennzeichnung.....	55
Recycling.....	55
Zusammenfassung und Follow-ups	56
Anpassung und Individualisierung	57
Richtlinien und Empfehlungen.....	57
Erlaubte Anpassungen der Pro Sharky	57
Geschäftsbedingungen	58
Garantie.....	58
Gewährleistungsansprüche	58
Rücksendung von Produkten.....	58
Technische Daten	59
Benutzer-Daten.....	59
Produktdaten	59

Gemeinsame Details

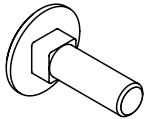


Flachrundschrauben

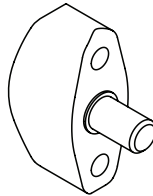


Drehknopf
Außengewinde




Drehknopf
Innengewinde

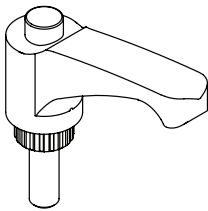

Verriegelungshebel

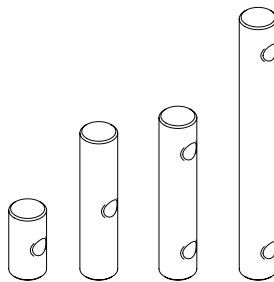

Schiene Stifte
Verschiedene Größen

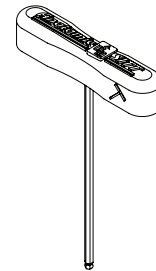

Inbusschlüssel
in der Rückseite des Profils integriert

Werkzeug

Der HEXA Montageschlüssel (4mm) ist im Rückenprofil integriert und jederzeit für Einstellungen griffbereit.

Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung durch, um alle Vorteile des Sharky Pro zu nützen. Dieses gilt für alle Personen im Umfeld des Gebrauchers. Dieses Produkt ist entworfen für Kunden mit Sitzproblemen auf Grund einer Reihe von Diagnosen. Die Einstellung von Zitzi Sharky Pro muß immer von einer medizinisch geschulten Person gemacht werden.

Für weitere Information, nehmen Sie bitte Kontakt mit Anatomic Sitt Benelux auf.

Anwendung

Zitzi Sharky pro ist ein Sitzsystem daß mit dem durch Anatomic Sitt produzierten Untergestell kombiniert werden kann. Wann Sie ein anderes Untergestell verwenden wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Anatomic Sitt Benelux.

Kennzeichnung

Zitzi Sharky Pro mit Zubehör ist ein CE-gekennzeichnetes Produkt. Die Seriennummer befindet sich auf dem Schild unterhalb des Rückenprofils. Diese Seriennummer muss bei eventueller Korrespondenz mit angegeben werden.

Chrashtest

Zitzi Sharky Pro ist chrasht-getested und ISO 16840-4 zugelassen. Mehr Information auf Seite 52.

Diese Produkt ist hergestellt durch Anatomic Sitt AB

Postfach: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping


Adresse: Anatomic Sitt AB, Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping.

Verteilung durch Anatomic Sitt Benelux und Deutschland

Telefon: 0031 344 634540

Fax: 0031 344 623361

Email: informatie@anatomicsitt.com

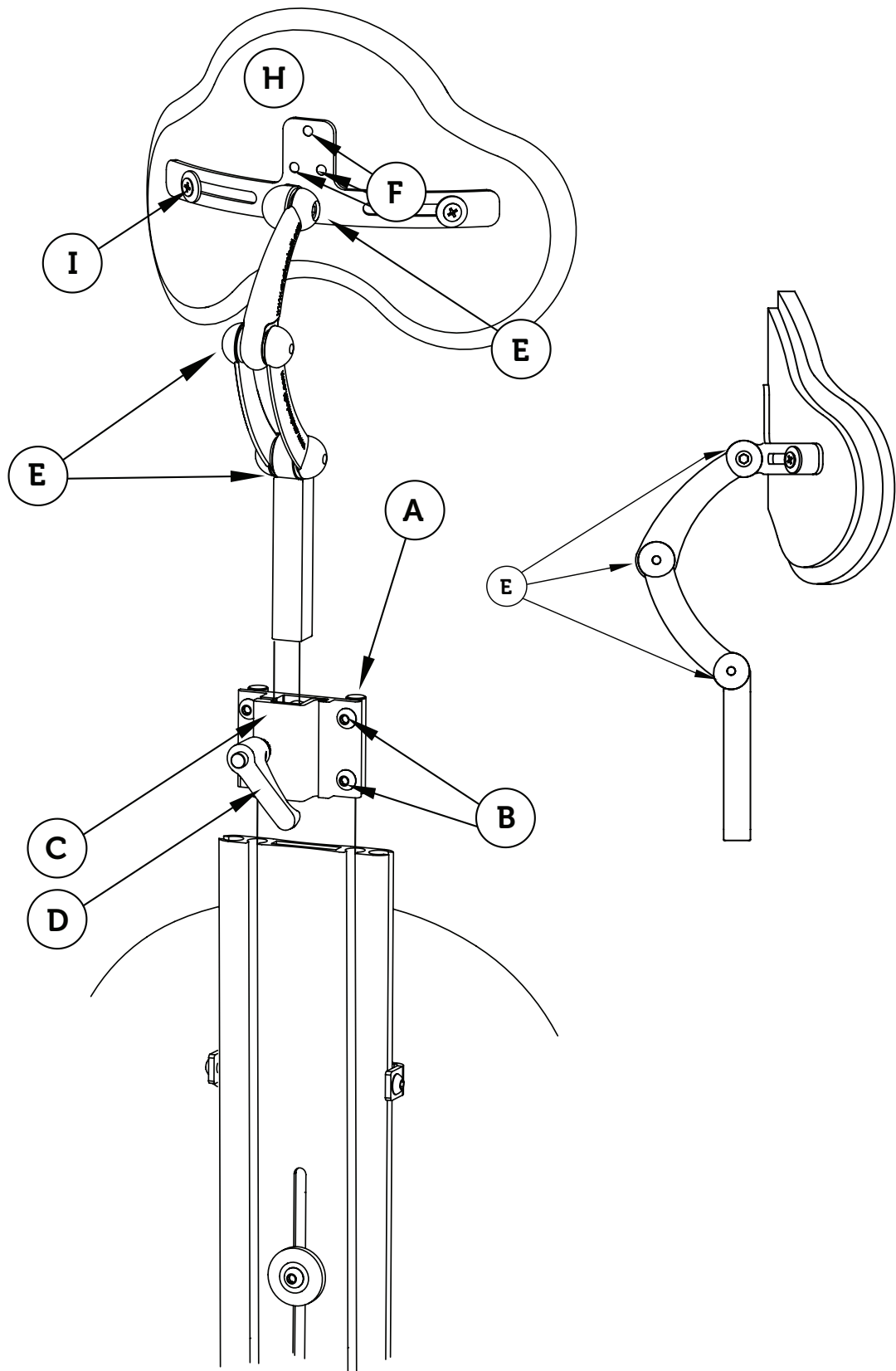

Kopfstütze

Montage der Kopfstützenhalterung

Entfernen Sie zunächst den im Rückenprofil befindlichen "HEXA" Montageschlüssel. Montieren Sie die Kopfstützenhalterung am Rückenprofil (A). Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, ziehen Sie die Schrauben an (B).

Befestigung der Kopfstütze

Befestigen Sie das Kopfstützenrohr in der Kopfstützenhalterung (C) und sichern Sie die Einstellung mit dem Klemmgriff(D).

Höheneinstellung der Kopfstütze


Für die Höheneinstellung lockern Sie die Verstellerschrauben (B) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Sichern Sie die Einstellung durch Anziehen der Schrauben(B).

Anpassung der Kopfstütze

Lockern Sie die Verstellerschrauben (C) etwas damit Sie die Kopfstütze mit der Hand anpassen können. In der gewünschten Einstellung die Schrauben (C) anziehen. Für Höheneinstellung lockern Sie den Klemmgriff(D) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Sichern Sie die Einstellung durch Anziehen des Klemmgriffs(D).

Befestigen der Halterung für das Stirnband

Entfernen Sie zunächst die Kopfstützenplatte (H), indem Sie die Verstellerschrauben lockern (I). Montieren Sie die Halterung an den Löchern (F) mit den mitgelieferten Schrauben. Siehe separate Instruktionen für das Montieren der Halterung des Stirnbands.

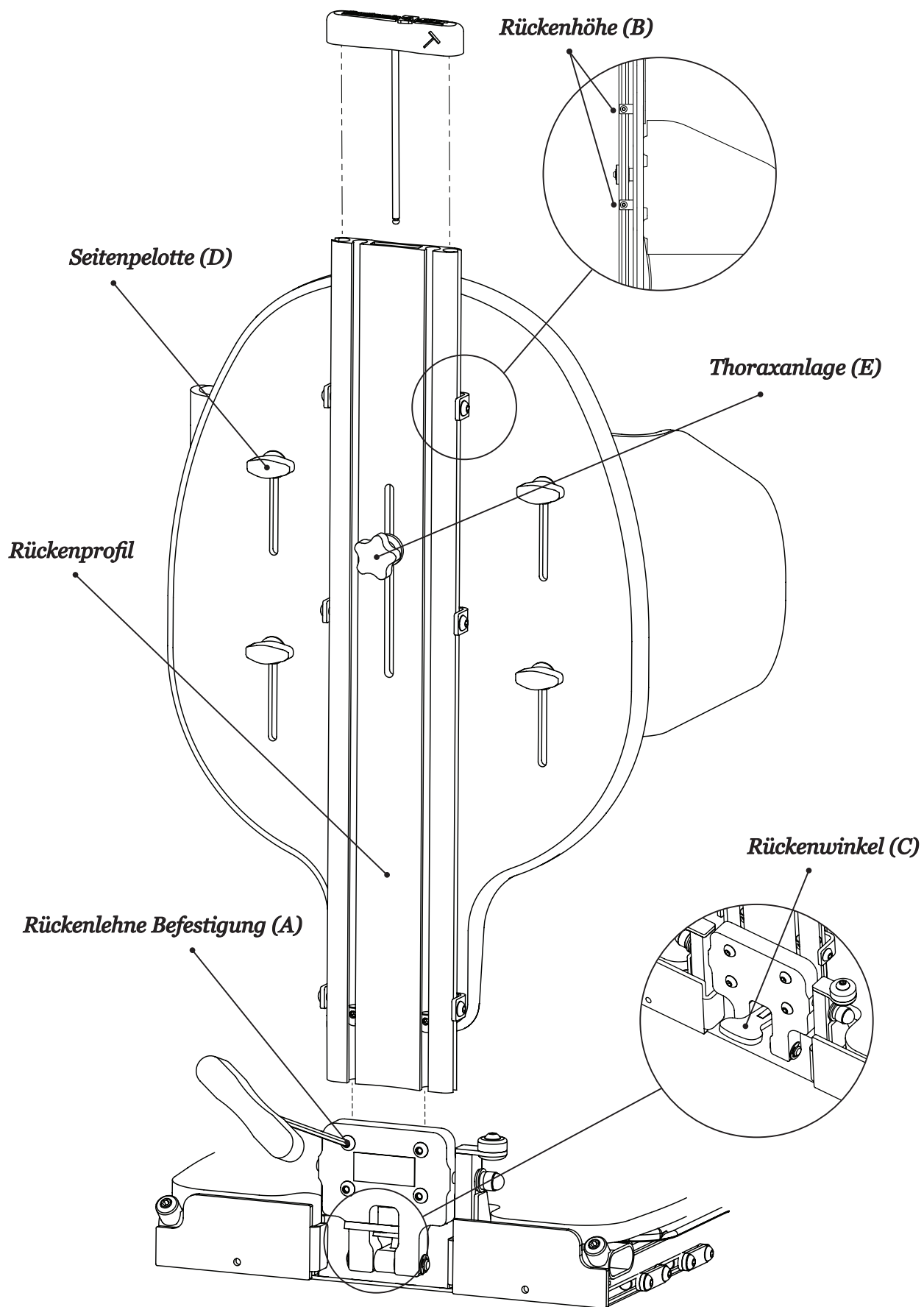

Rückenlehne

Einstellung der Rückenlehne

Die Rückenlehne ist mit 4 Schrauben (A) befestigt. Schieben Sie das Rückenprofil in die Halterung der Rückenlehne. Sichern Sie durch Anziehen der Schrauben (A) die Rückeneinstellung. Die Rückenlehne ist automatisch in der richtigen Position.

Verstellung der Rückenhöhe

Lockern Sie die Schrauben (B) auf beiden Seiten mit dem HEXA Montageschlüssel, stellen Sie die gewünschte Rückenhöhe ein und ziehen Sie die Schrauben (B) wieder fest.

Winkeleinstellung der Rückenlehne

Um den Verstellhebel auszulösen, müssen Sie ihn gerade heraus und dann nach oben ziehen. Zur Verstellung der Rückenlehne halten Sie den Hebel gedrückt. Nach der Einstellung des Rückenwinkels lassen Sie ihn in der Kindersicherung einrasten.



Wichtig!

Halten Sie die Rückenlehne nach hinten wenn Sie die Gasdruckfeder benützen.

Einstellung der Thoraxanlage

Wenn Sie die Höhe und Breite einstellen wollen, lockern Sie die Flügelmuttern (D). Wenn Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben ziehen Sie die Flügelmuttern fest.

Einstellen der Lumbar Stütze



Lockern Sie den Knopf (E) und drücken Sie die Stütze, welche hinter dem Bezug ist, nach unten, bis die gewünschte Position erreicht ist. Halten Sie die Stütze fest und ziehen Sie den Knopf (E) wieder fest.

Wichtig!

Die Rückenlehne kann bei Bedarf in der Höhe verstellt werden, um die Stütze in die richtige Position zu bekommen.

Tip!

Nehmen Sie den Bezug der Rückenstütze heraus, um beim Einstellen mehr Sicht zu bekommen.

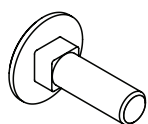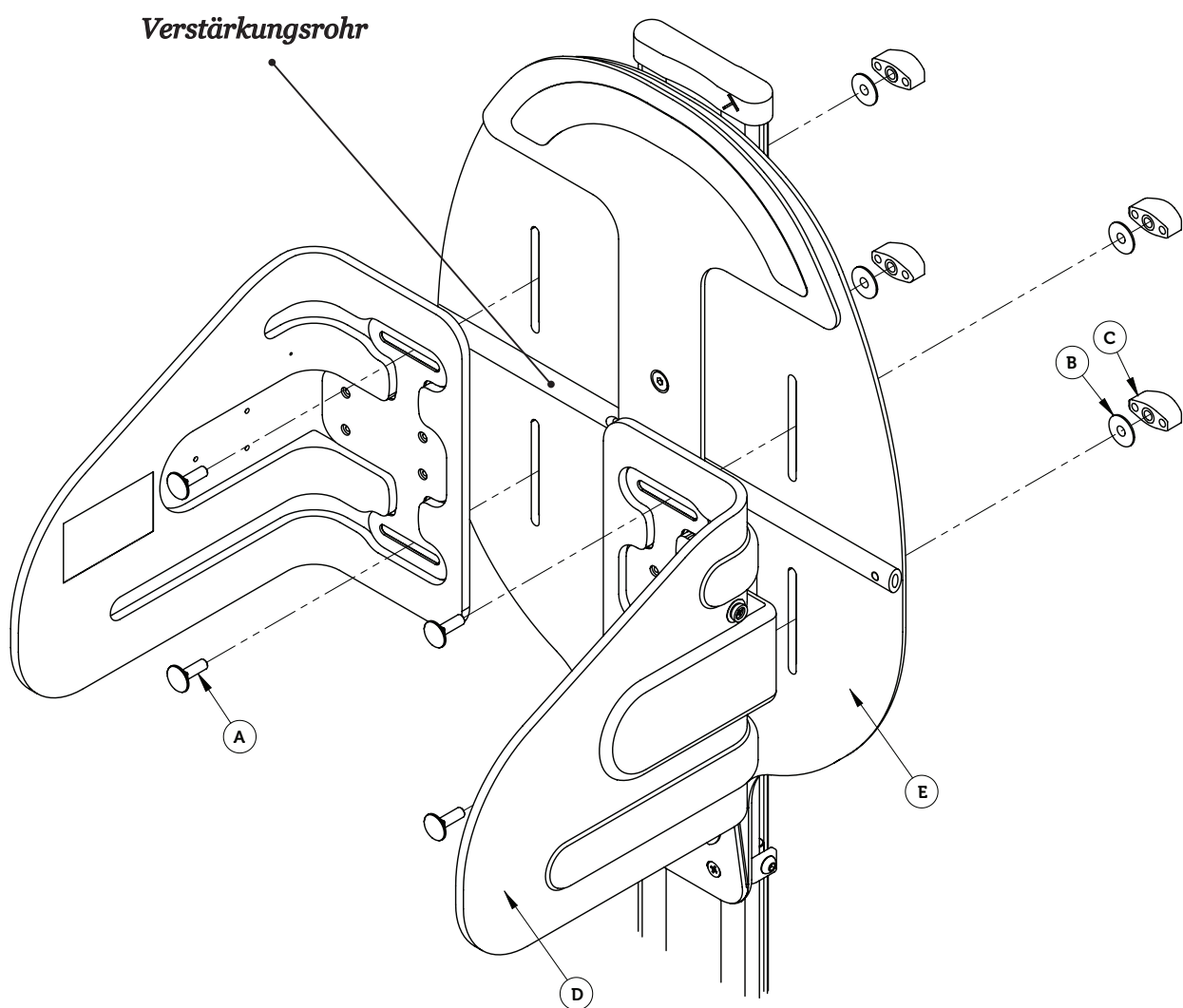

Schraube (A)
4 st



Dichtung (B)
4 st



Flügelmutter (C)
4 st

Thoraxanlage

Montage der Thoraxanlage

Montieren Sie die Thoraxanlage mit der Schraube (A), Dichtung(B), Flügelmutter (C) und dem Montagebeschlag (D). Der Montagebeschlag verhindert, dass die Schraube sich im Schlitz dreht.

Schieben Sie die Schraube (A) durch den Montagebeschlag (D), die Thoraxanlage (E) und den Schlitz der Rückenlehne (F). Dichtung (B) aufstecken und Flügelmutter (C) an der anderen Seite der Rückenlehne fest ziehen. (F)


Tip!

Siehe Seite 8-9 dieser Gebrauchsanweisung um die Thoraxanlage einzustellen.

Alternative Möglichkeit der Thoraxanlage


Statt der Standard Thoraxanlage können Sie auch die abklappbare Thoraxanlage nutzen oder die verstärkte Thoraxanlage. Die Montage erfolgt wie oben beschrieben.

Die verstärkte Thoraxanlage wird mit Verstärkungsrohr geliefert. Lesen Sie die separate Anleitung.


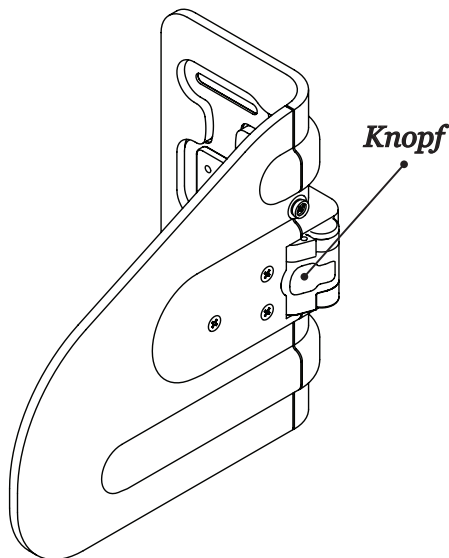


Abklappbare Thoraxanlage

Drücken Sie auf den roten Knopf zum abklappen der Rückenstuetze.

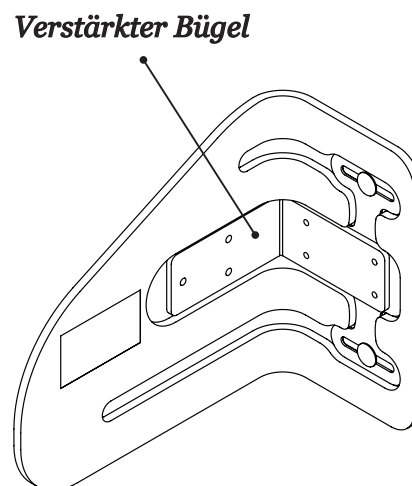

Verstärkte Thoraxanlage

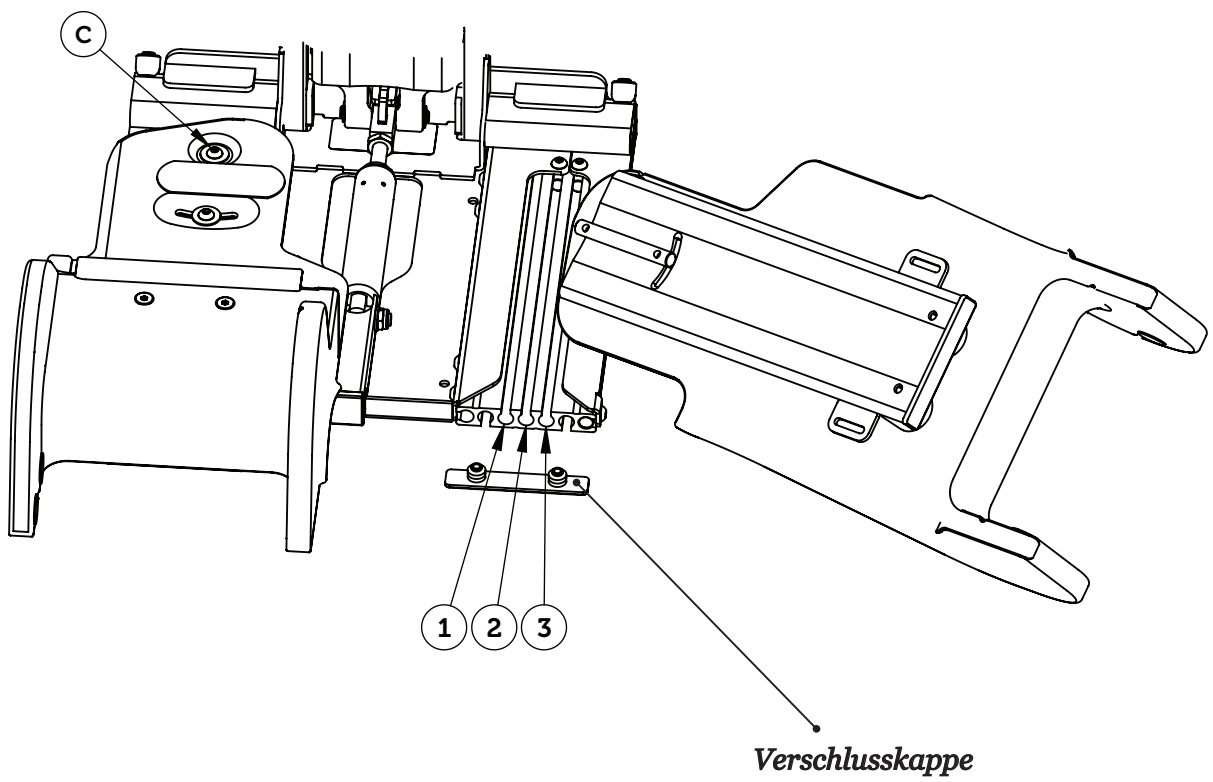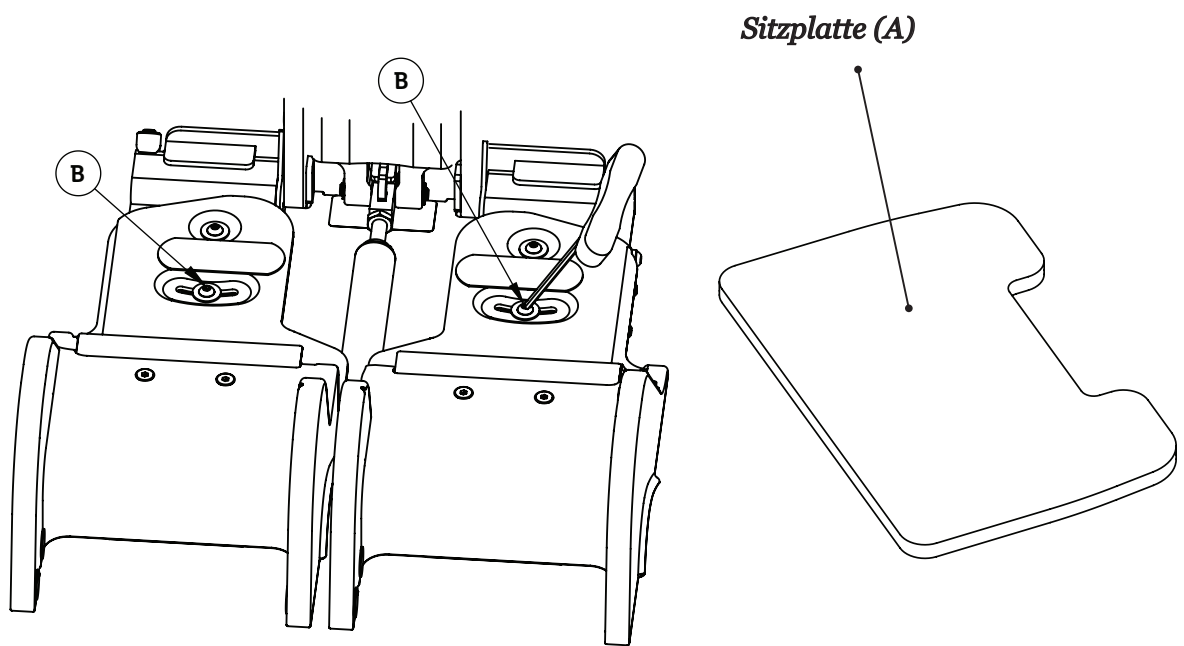

Sitzeinheit

Sitztiefe, Beinlängendifferenz, Abduktion und Adduktion der Beine ist einfach einzustellen. Entfernen Sie zuerst den Bezug der Sitzfläche und die Sitzplatte(A) um an die Einstellschrauben (B) zu gelangen.

Wichtig!

Lockern Sie die Schrauben zum einstellen niemals völlig, sondern nur leicht!


Einstellung der Sitzbreite

Zur Verstellung der Sitzbreite müssen die Oberschenkelführungen eingestellt werden. Lösen Sie mit dem HEXA Montageschlüssel die 2 Schrauben (B) und entfernen Sie die Endkappe. Schieben Sie die Oberschenkelführungen aus der Führungsschiene in die gewünschte Position.

Für maximale Sitzbreite, sollte die Felge in Spur 3 sein, und für minimale Sitzbreite sollte die Felge in Spur 1 sein. Ziehen Sie die Schrauben (B) an, sobald die gewünschte Position erreicht ist. Es kann sein, dass die hintere Schraube (C) von Zeit zu Zeit ein wenig gelockert werden muss.

Tip!

Die technischen Daten der Sitzeinheit finden Sie auf Seite 59 in dieser Gebrauchsanweisung.

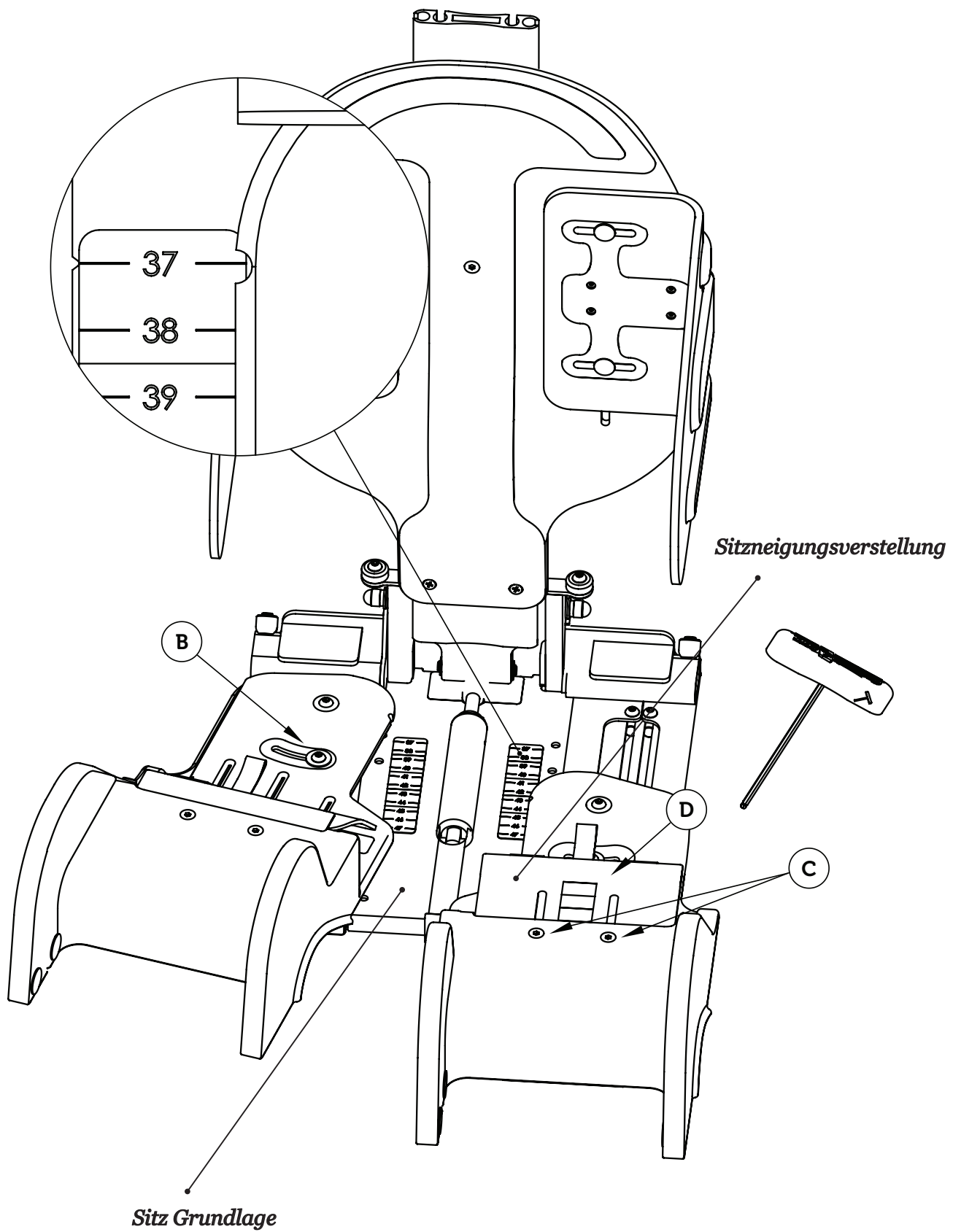

Sitzeinheit

Beinlängendifferenz

Lösen Sie beide Schrauben (B) mit Hilfe des HEXA Montageschlüssel und wählen Sie die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schrauben (B) wieder fest.

Sitzneigungsverstellung

Nach Einstellung der Sitztiefe kann die Sitzneigung verstellt werden. Lockern Sie beide Schrauben (C) mit Hilfe des HEXA Montageschlüssel und wählen Sie die gewünschte Position aus. Dann ziehen Sie die Schrauben wieder an.

Tip!

Eine gute Hilfe zur optimalen Einstellung der Sitzneigungsverstellung ist die Farbskala auf der Sitzbasis. Ist die Sitztiefe z.B. bei 43 cm eingestellt (graue Markierung) sollte für einen optimalen Sitz die Sitzneigung auch an der grauen Markierung eingestellt werden.

Die Feineinstellungen sollten immer den Wünschen des Kunden entsprechen.

Abduktion, Adduktion und Windswept

Lockern Sie die Schrauben (B) mit Hilfe des HEXA Montageschlüssel und stellen Sie die gewünschte Position ein, danach ziehen Sie die Schrauben (B) fest.

Achtung!

Lockern Sie die Schrauben niemals völlig, es genügt die Schrauben leicht zu lockern.

Heizung

Heizung

Das Heizkissen hält die Körpertemperatur bei kaltem Wetter . Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, wird das Heizkissen automatisch ausgeschaltet und schaltet sich wieder an wenn die Temperatur zu niedrig wird.

Die Anschlüsse sind sorgfältig ausgewählt, um das Risiko von falsche Verbindung zu minimieren. Unter keinen Umständen sollten die Stecker, die Batterie oder das Ladegerät mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Die Heizkissen werden unter den Bezug der Sitz- und Rückenlehne mit Klettband befestigt.

Heizkissen

Die Heizkissen haben eine eingebaute Temperaturkontrolle innerhalb einer Spanne von + 27 ° C bis + 32 ° C. Die Isolierung hält, niedrige als auch hohe Temperaturen und ist unabhängig von Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Chemikalien. Das Pad Material ist schwer entflammbar (FMVSS 302). Das Heizkissen ist der leachy Material, um Kondensation zu vermeiden.

Die Batterie

Die Batterie ist aufladbar (Ni-MH) und sollte mit dem mitgelieferten Lader aufgeladen werden.

Wenn nicht mehr brauchbar sollte die Batterie bei einer Wiederverwertungsstation eingeliefert werden.



Achtung!

Nicht mehr brauchbare Batterien bei einer Wiederverwertungsstation abgeben.



Aufladen der Batterie

Folgen Sie den Anweisungen zum Aufladen der Batterie. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisungen für weitere Information.

- 1) Stecken Sie den Auflader in die Steckdose, 230V, 50 Hz.
- 2) Befestigen Sie den Auflader an der Erteilungskaste.
- 3) Beim Aufladen einer ungeladenen Batterie leuchtet in der LED Anzeige ein gelbes Licht. Nach einiger Zeit wird das Licht grün.
- 4) Lassen Sie die Batterie angeschlossen bis das Licht immer grün bleibt. Dann ist die Batterie gebrauchsfähig.
- 5) Nehmen Sie den Auflader aus der Steckdose.
- 6) Nehmen Sie den Auflader aus die Erteilkaste.

Achtung!

Wenn das Licht der LED Anzeige schnell und gelb blinkt, deutet auf eine nicht gebrauchsfähige Batterie hin.

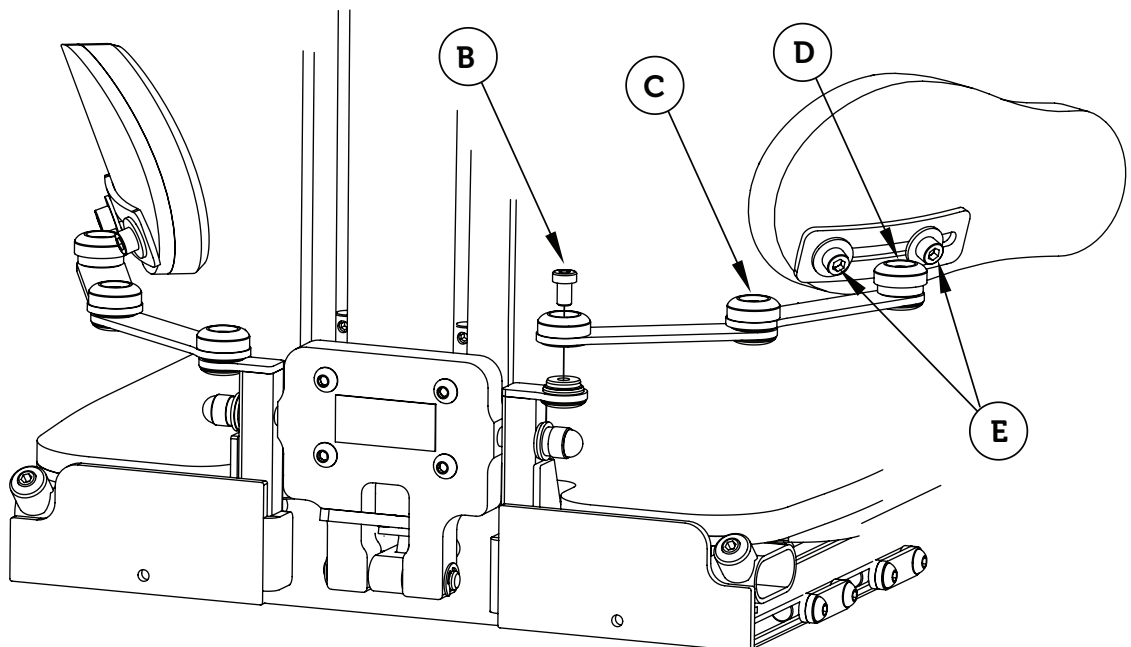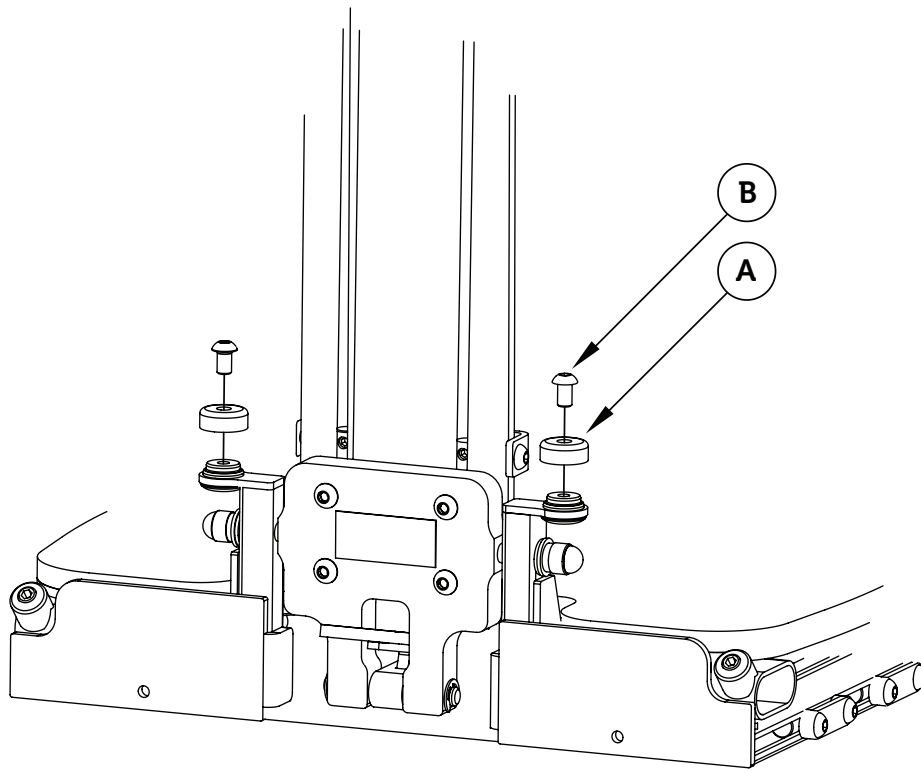

Beckenanlage

Befestigung der Beckenanlage


Entfernen Sie zuerst die Abdeckung (A), dann können Sie die Beckenanlage montieren. Entfernen Sie die Schrauben (B), und entfernen Sie dann die Abdeckung. Die Schraube (B) wird ersetzt durch Schraube (C).

Montieren Sie die Beckenanlage an die Stelle der entfernten Abdeckung und ziehen Sie die Schraube (C) an.


Anpassung der Beckenanlage

Lockern Sie die Schrauben (C) (D) oder (E) abhängig von den Einstellungen, die Sie vornehmen wollen. Wählen Sie die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben an.


Lockern Sie die Schrauben (F) um die Höhe der Beckenanlage zu ändern. Wählen Sie die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

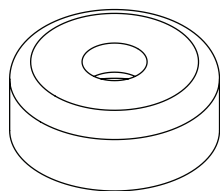

Abdeckung (A)
Entfernt

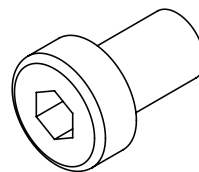

M6-Schraube (B)
Ersetzt durch (C)

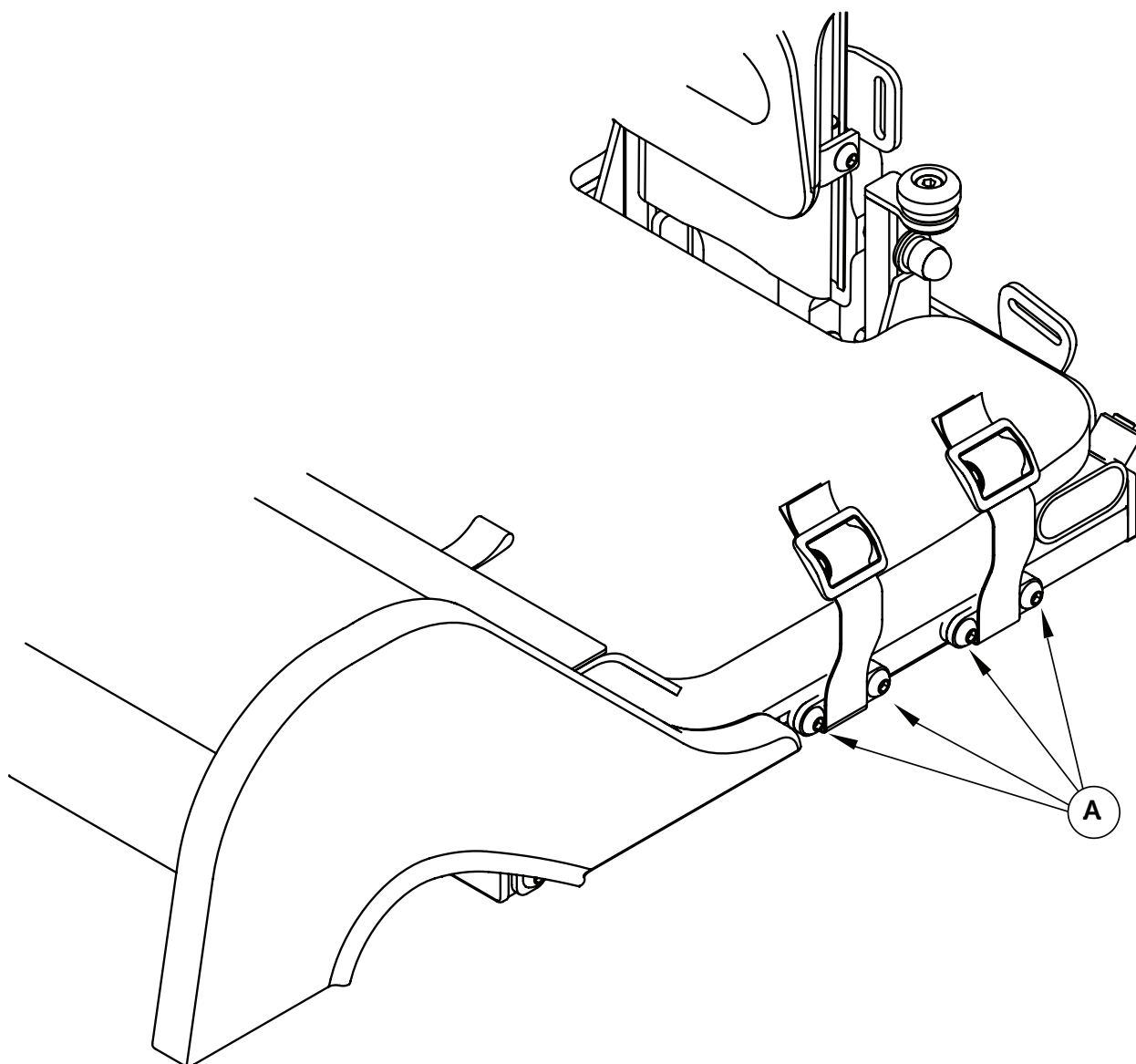

Beckengurt


Anpassung des Beckengurtes


Für die Anpassung des Beckengurtes lösen Sie die Schrauben (A). Der Beschlag kann einfach justiert werden. Sobald die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die Schrauben (A) fest.

Befestigung des Gurtes

Wann Sie den Beckengurt montieren, verwenden Sie die beiliegende 3-fach Schnalle. Siehe Foto.

Tri-glide method

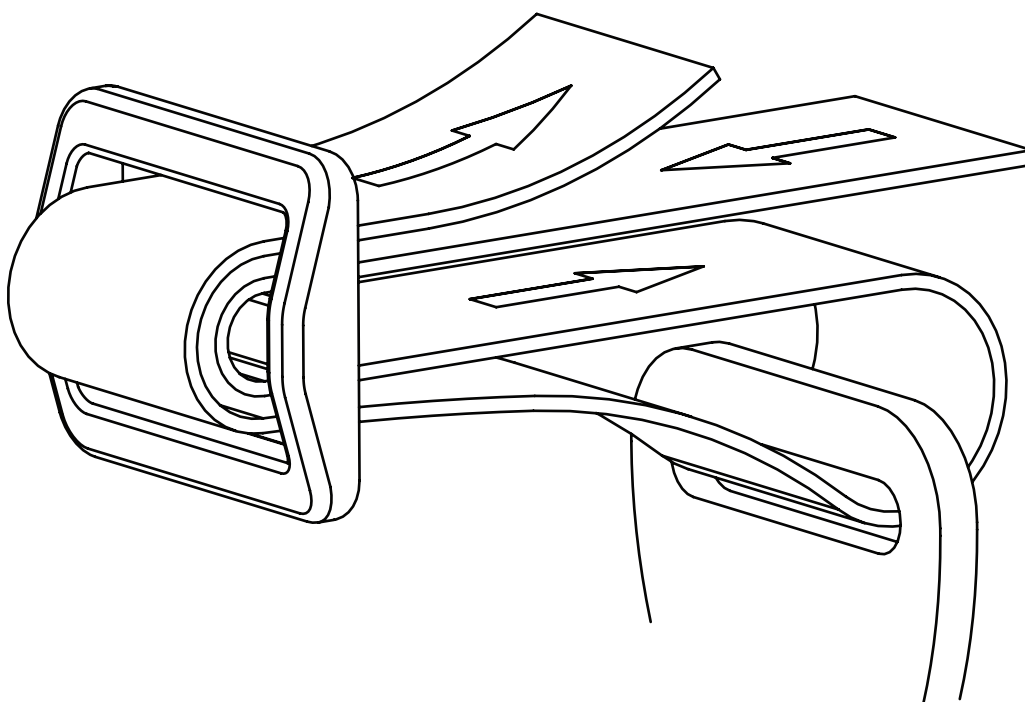

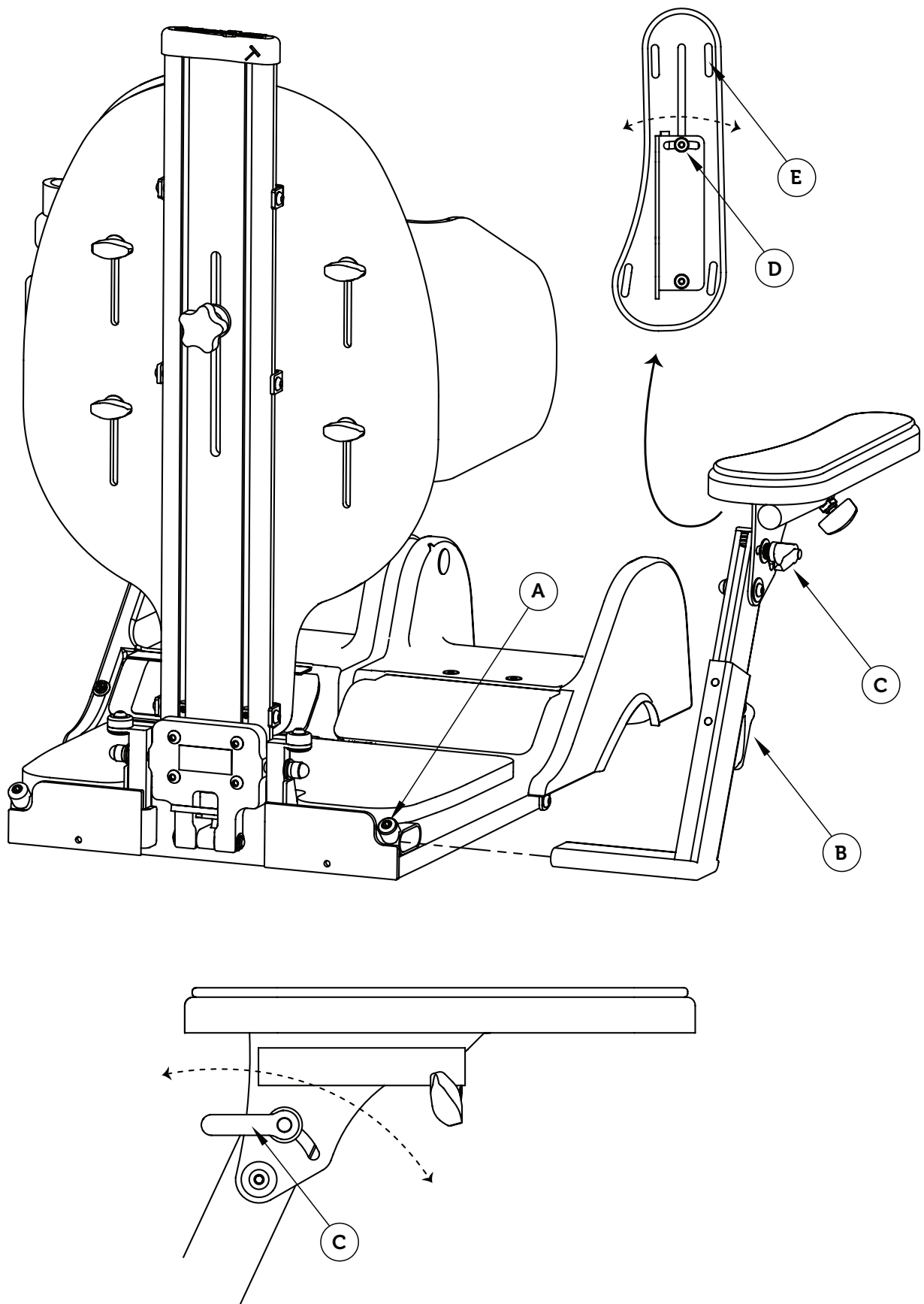

Armlehnen vom Sitz

Befestigung der Armlehnen

Für die Montage stecken Sie die Armlehnen in die vorgesehene Halterung an der Seite des Sitzes und ziehen Sie die Schrauben(A) fest.

Breitenverstellung

Lösen Sie die Schrauben(A) und stellen Sie die gewünschte Position ein. Ziehen Sie die Schrauben (A) fest.

Höhenverstellung der Armauflage

Lösen Sie den Hebel (B) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie den Hebel(B) wieder fest.

Winkelverstellung der Armauflage


Lösen Sie den Hebel (C) und stellen Sie den gewünschten Winkel ein. Ziehen Sie den Hebel (C) wieder fest.

Verstellung seitlichen Winkel

Lösen Sie die Schrauben (D) und stellen Sie die gewünschten seitlichen Winkel ein. Ziehen Sie die Schrauben (D) wieder fest.

Bezug

Befestigen Sie das Kissen auf der Armlehnen-Platte durch Befestigung der Klettverschlüsse durch die vier Öffnungen (E) und verbinden sie diese miteinander in der Unterseite der Platte.

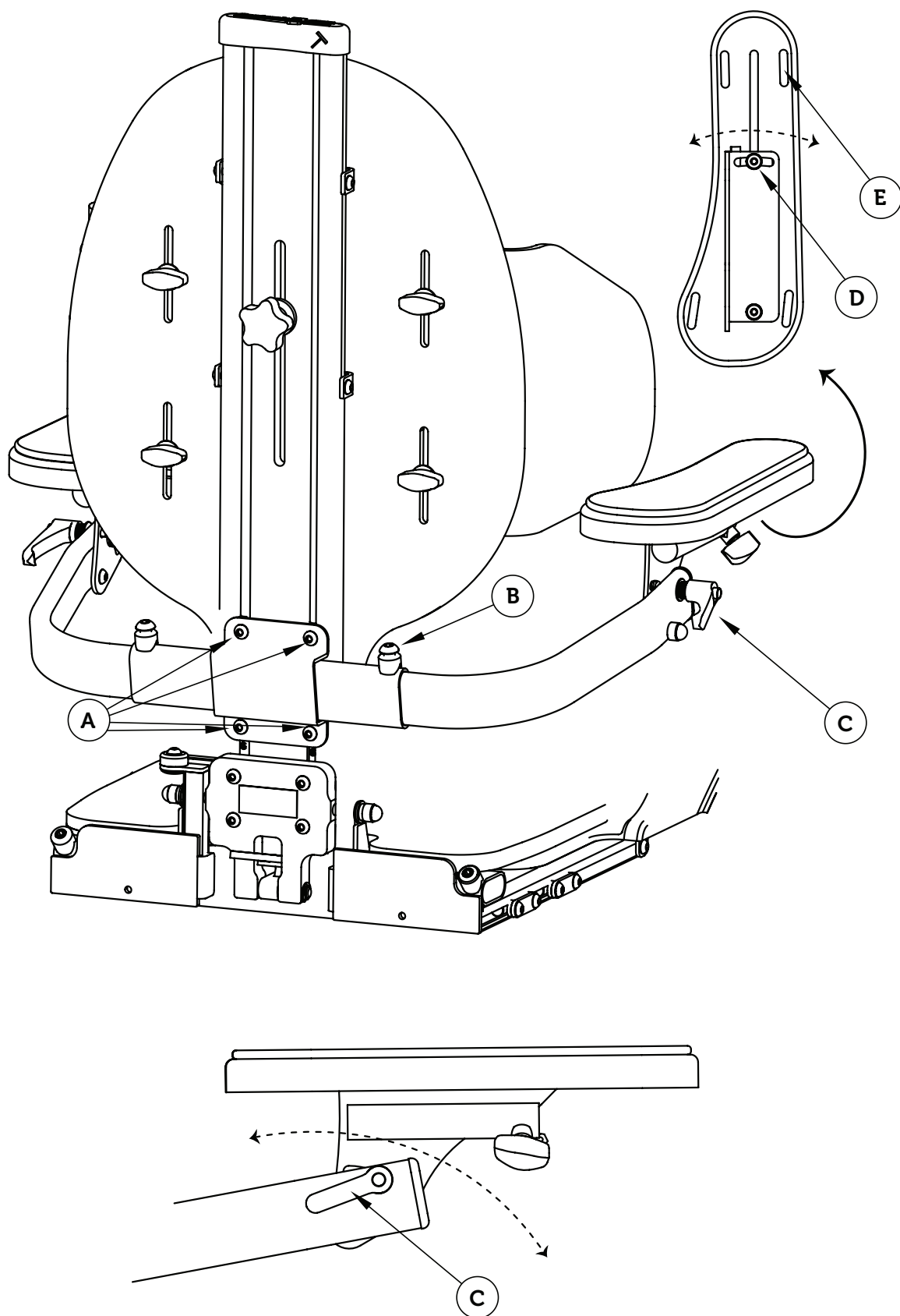

Armlehnen von hinten befestigt

Montage von festen Armlehnen

Vor der Montage der Armlehnen von der Rückseite, müssen Sie zuerst den HEXA Montageschlüssel und möglicherweise auch andere Teile, die bereits montiert sind, entfernen. Dabei kann es sich um die Kopfstütze, die obere Halterungen oder den Schiebebügel handeln. Schieben Sie die Schiene Stifte der Armlehnen Halterung in die Spuren des Rückens Profil. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, ziehen Sie die Schrauben (A) fest. Montieren Sie dann die Teile, die Sie vor der Montage der Armlehnen- Halterung entfernt haben.

Breitenverstellung

Lösen Sie die Schrauben(A) und stellen Sie die gewünschte Position ein. Ziehen Sie die Schrauben (A) fest.

Höhenverstellung der Armauflage

Lösen Sie den Hebel (B) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie den Hebel(B) wieder fest.

Winkelverstellung der Armauflage


Lösen Sie den Hebel (C) und stellen Sie den gewünschte Winkel ein. Ziehen Sie den Hebel (C) wieder fest.

Verstellung des seitlichen Winkels

Lösen Sie die Schrauben (D) und stellen Sie den gewünschten lateralen Winkel ein. Ziehen Sie die Schrauben (D) wieder fest.

Bezug

Befestigen Sie das Kissen auf der Armlehnen-Platte durch Befestigung der Klettverschlüsse durch die vier Öffnungen (E) und verbinden sie die miteinander in der Unterseite der Platte.

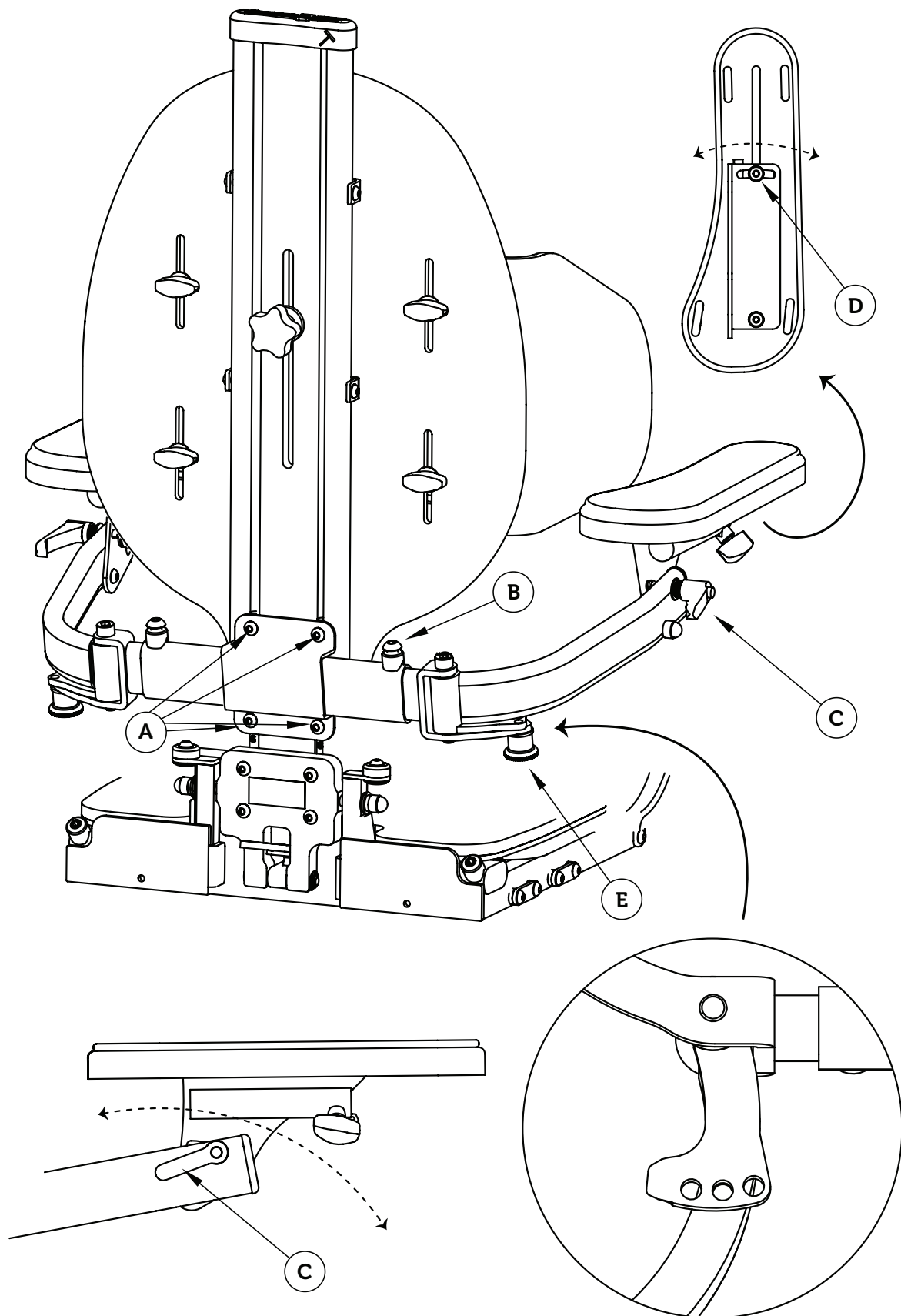

Drei Loch Positionen
Um den Winkel der Armlehne einzustellen

Armlehnen von hinten befestigt, faltbar

Montage von festen Armlehnen

Vor der Montage der Armlehnen von der Rückseite, müssen Sie zuerst den HEXA Montageschlüssel und möglicherweise auch andere Details, die bereits montiert sind, entfernen. Dabei kann es sich um die Kopfstütze, die obere Halterungen oder den Schiebebügel handeln. Schieben Sie die Schiene Stifte der Armlehnen-Halterung in die Spuren des Rücken Profils. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, ziehen Sie die Schrauben (A) fest. Montieren Sie die Details , die Sie vor der Montage der Armlehnen- Halterung entfernt haben.

Breitenverstellung

Lösen Sie die Schrauben(A) und stellen Sie die gewünschte Position ein. Ziehen Sie die Schrauben (A) fest.

Höhenverstellung der Armauflage

Lösen Sie den Hebel (B) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie den Hebel(B) wieder fest.

Winkelverstellung der Armauflage


Lösen Sie das Hebel (C) und stellen Sie die gewünschte Winkel ein. Ziehen Sie das Hebel (C) wieder fest.

Verstellung seitlichen Winkel

Lösen Sie die Schrauben (D) und stellen Sie den gewünschten lateralen Winkel ein. Ziehen Sie die Schrauben (D) wieder fest.

Die Faltungs-Funktion

Um die Armlehne zur Seite zu klappen, ziehen Sie den Feststellknopf (E) nach unten und klappen Sie die Armlehne weg. Stellen Sie sicher, dass es klickt, wenn Sie die Armlehne wieder zurück klappen. Die Fähigkeit, den Winkel einzustellen wird durch drei Bohrungen für den Verriegelungsknopf gegeben.

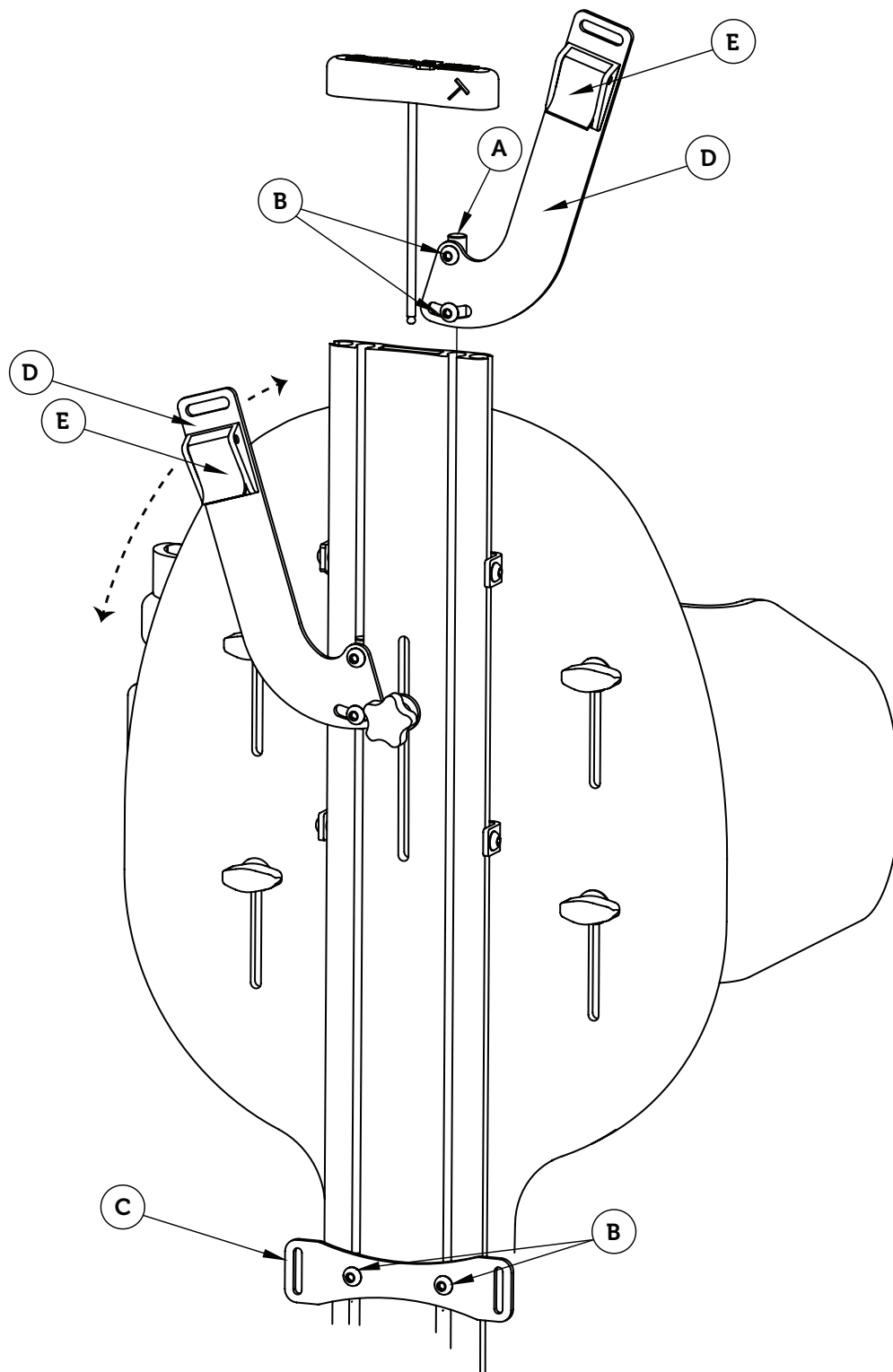

die Schiene Stifte (A)
4 st

M6 Schraube (B)
6 st

Untere Befestigung (C)
als Standard inklusive

Untere Befestigung (F)
Wahlweise

Montage des Fixierungswestes

Montage des unteren Montagewinkels

Vor der Montage des unteren Montagewinkels (C), müssen Sie zuerst den HEXA-Montageschlüssel entfernen und möglicherweise auch andere Teile, die bereits montiert sind. Dabei kann es sich um eine Kopfstütze, obere Halterungen oder den Schiebebügel handeln.

Schieben Sie die Schiene Stifte des unteren Montagebügel in die Spuren der hinteren Profil. Sobald Sie die gewünschte Position erreichen, ziehen Sie die Schrauben (B) fest. Montieren Sie die Teile, die Sie vor der Montage der Halterung entfernt haben.

Einstellen der unteren Montagewinkel

Um die Höhe einzustellen, lösen Sie die Schrauben (B) und bewegen Sie die Halterung in die gewünschte Position, und ziehen Sie dann die Schrauben (B) an.

Montage der oberen Halterung


Entfernen Sie den Inbussschlüssel und schieben Sie die Schiene Stifte (A) der oberen Halterung (D) in die Spur des Rückenprofils. Sobald Sie die gewünschte Höhe für die Halterung erreichen, ziehen Sie die Schrauben (B) an. Setzen Sie den Inbussschlüssel wieder in das Profil.


Einstellen der oberen Halterung

Für die Höhe und Neigungsverstellung, lösen Sie die Schrauben (B) leicht und verschieben dann den Bügel in die gewünschte Position, und ziehen dann die Schrauben (B) an.

Alternative Montage der unteren Halterungen

Für eine niedrigeren Befestigung des Gurtes kann eine alternative Halterung (F) verwendet werden. Diese wird mit der mitgelieferten Schraube in die vorhandene Löcher auf der Sitzfläche befestigt.

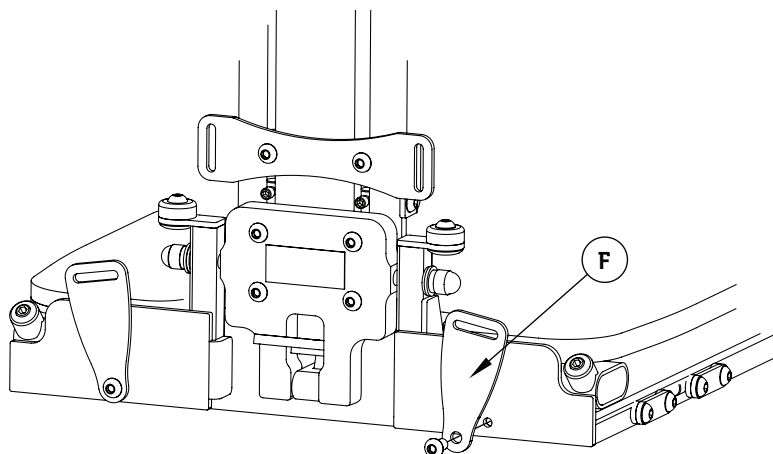

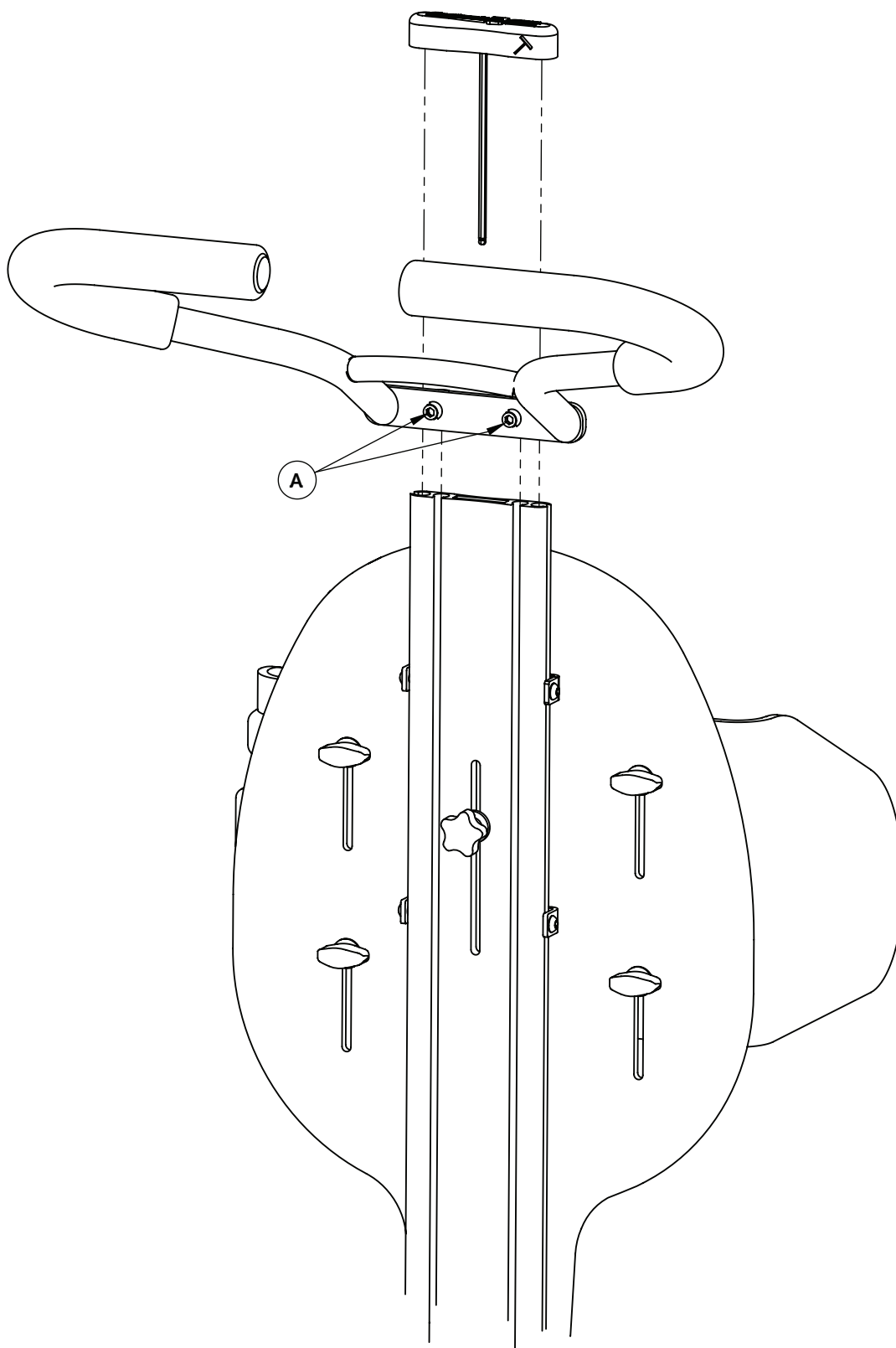

Schiebebügel


Vor der Montage des Schiebebügels, müssen Sie zuerst den Inbussschlüssel und alle anderen Details, die bereits montiert sind entfernen. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Kopfstütze und die oberen Halterungen handeln. Schieben Sie die Stifte der Schiebebügel in das Rücken Profil. Sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben, ziehen Sie die Schrauben (A) fest. Montieren Sie die Teile, die Sie möglicherweise vor der Montage entfernt haben.

Einstellen der Höhe

Um die Höhe der Schiebebügel einzustellen, lösen Sie die Schrauben (A) leicht und bewegen Sie die Schiebebügel auf die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die Schrauben (A) fest, wenn die gewünschte Höhe erreicht ist.

Hinweis!


Beachten Sie, dass Sie nie die Schrauben vollständig entfernen, um die Höhe der Schiebebügel einzustellen, es genügt sie leicht zu lösen.

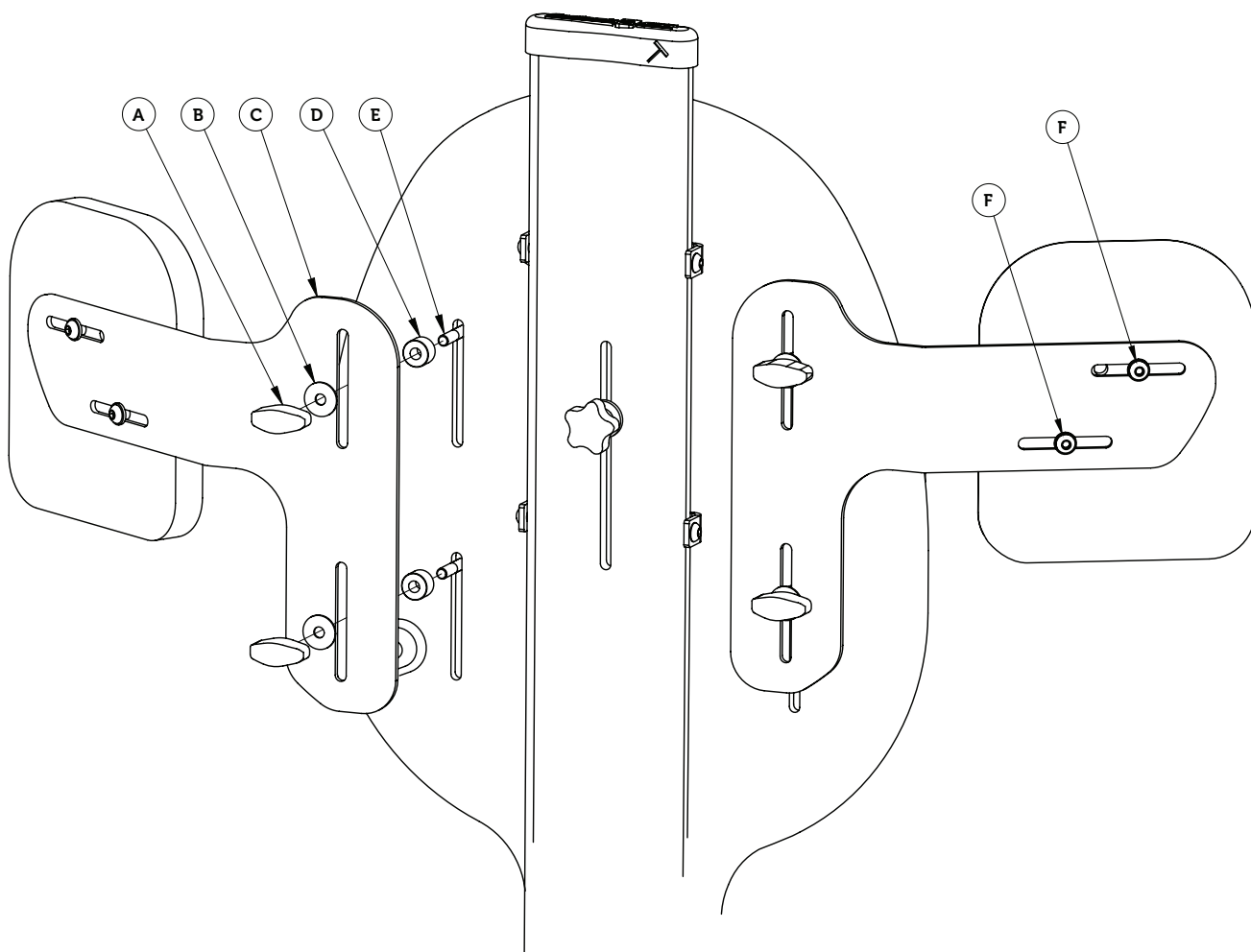


Flügelmutter (A)
4 st



Unterlegscheibe (B)
4 st

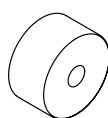

Distanzscheibe (D)
4 st

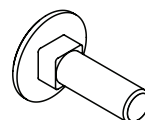

Schlossschraube (E)
4 st

Oberarm Stütze

Montage der Oberarm-Stütze

Montieren Sie die Oberarm-Stütze mit den Flügelmuttern (A), Unterlegscheiben (B), Distanzscheibe (D) und Schlossschrauben (E). Beachten Sie, daß die Schlossschrauben in der gelieferten seitlichen Stütze durch längere Schlossschrauben ersetzt werden müssen,. Für weitere detaillierte Informationen über die seitliche Stütze, sehen Sie Seite 6 dieses Handbuchs. Setzen die Schlossschrauben (E) durch den seitlichen Träger und den Schlitz in der Rückplatte. Machen Sie Kontakt mit Abstandshalter (D), den Oberarm Halterung (C), Unterlegscheiben (B) und einem Flügelmutter (A) auf der gegenüberliegenden Seite der Rückenlehne.

Hinweis!

Die Schlossschrauben in der seitlichen Abstützung müssen ersetzt werden durch die längeren mitgelieferten Schlossschrauben bei der Montage der obere Armstützen.

Einstellen der Höhe

Um die Höhe der Oberarm-Stütze einzustellen, lösen Sie die Flügelmutter (A) und stellen Sie diese auf die gewünschte Höhe ein. Bei Erreichen der gewünschten Position ziehen Sie die Flügelmutter fest (A).

Breite einstellen


Um die Breite der Oberarm-Stütze einzustellen, lösen Sie die Schrauben (F), und stellen Sie dann die gewünschte Breite ein. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis!

Bei der Einstellung der oberen Armstütze, ist die seitliche Stütze gleichzeitig einzustellen.

Kissenbezug

Wenn das Kissen gewaschen werden muss, entfernen Sie es von der Oberarm-Trägerplatte indem sie das elastischen Band recken.

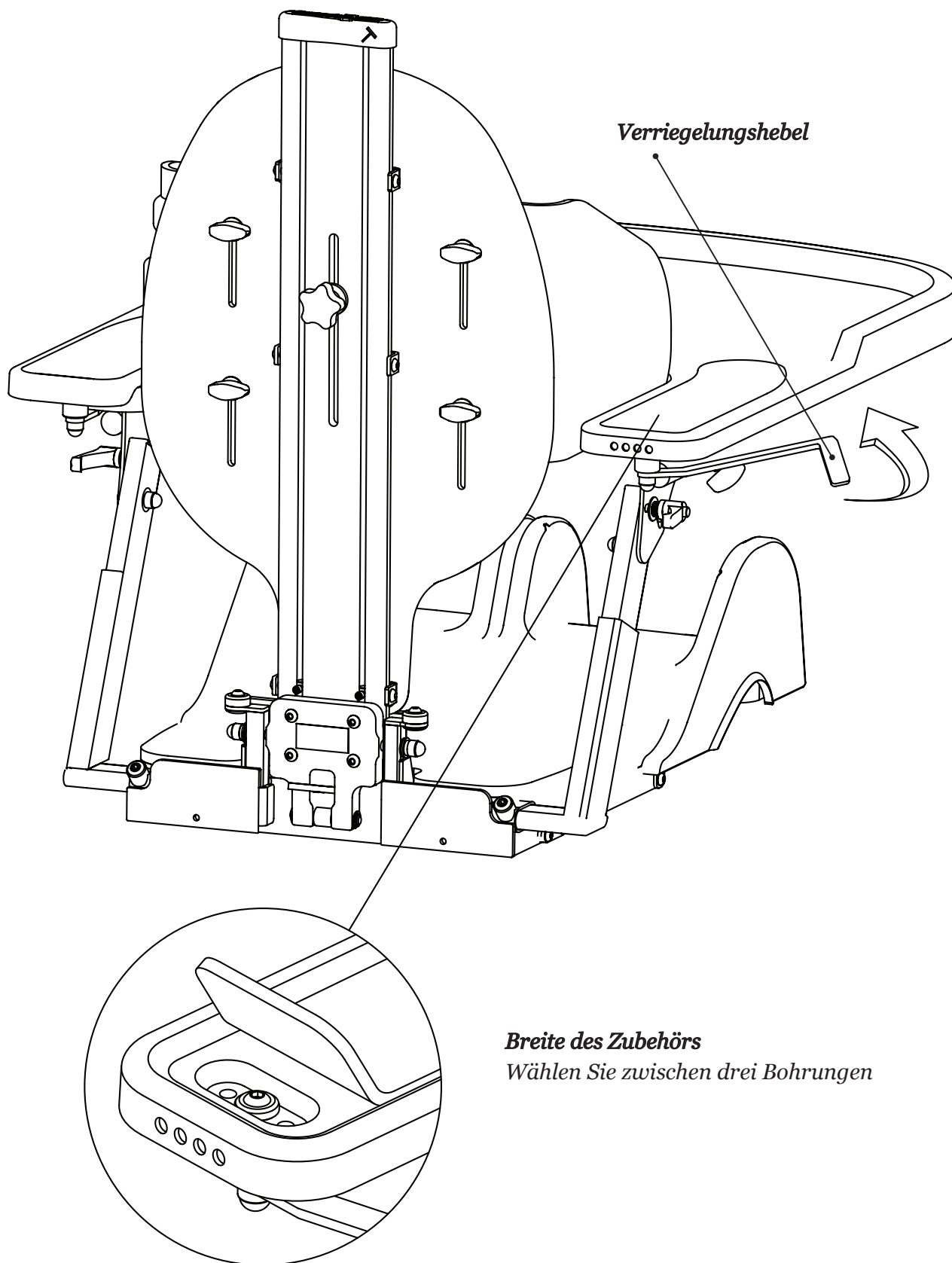

Verriegelungshebel

Breite des Zubehörs

Wählen Sie zwischen drei Bohrungen

Tisch, fixiert

Montage des Tisches

Legen Sie den Tisch auf die Armlehnen-Platten und drehen Sie dann den Verriegelungshebel des Tisches in die Position unterhalb der Armlehnen-Platte. Der Verriegelungshebel muss gedreht werden, bis er in die Felge der erhöhten Armlehnen-Platte einrastet.



Änderung die Befestigungslöcher

Es gibt 3 Montage Breiten zur Auswahl. Um die Breite zu ändern, verwenden Sie eine der optionalen Bohrungen unter der Polsterung. Der Verriegelungshebel wird standardmässig in das zentrale Loch montiert. Um das Montageloch zu ändern, müssen Sie zuerst das hintere Ende der Polsterung heben. Die Lochmarkierungen an der hinteren Kante zeigt die Größe des Tisches.




Hinweis!


Heben Sie die Vorderseite des Tisches nicht an!

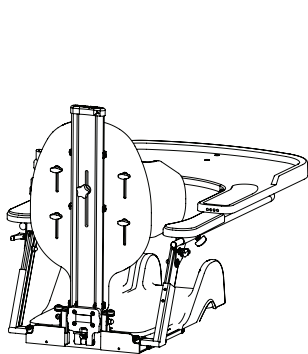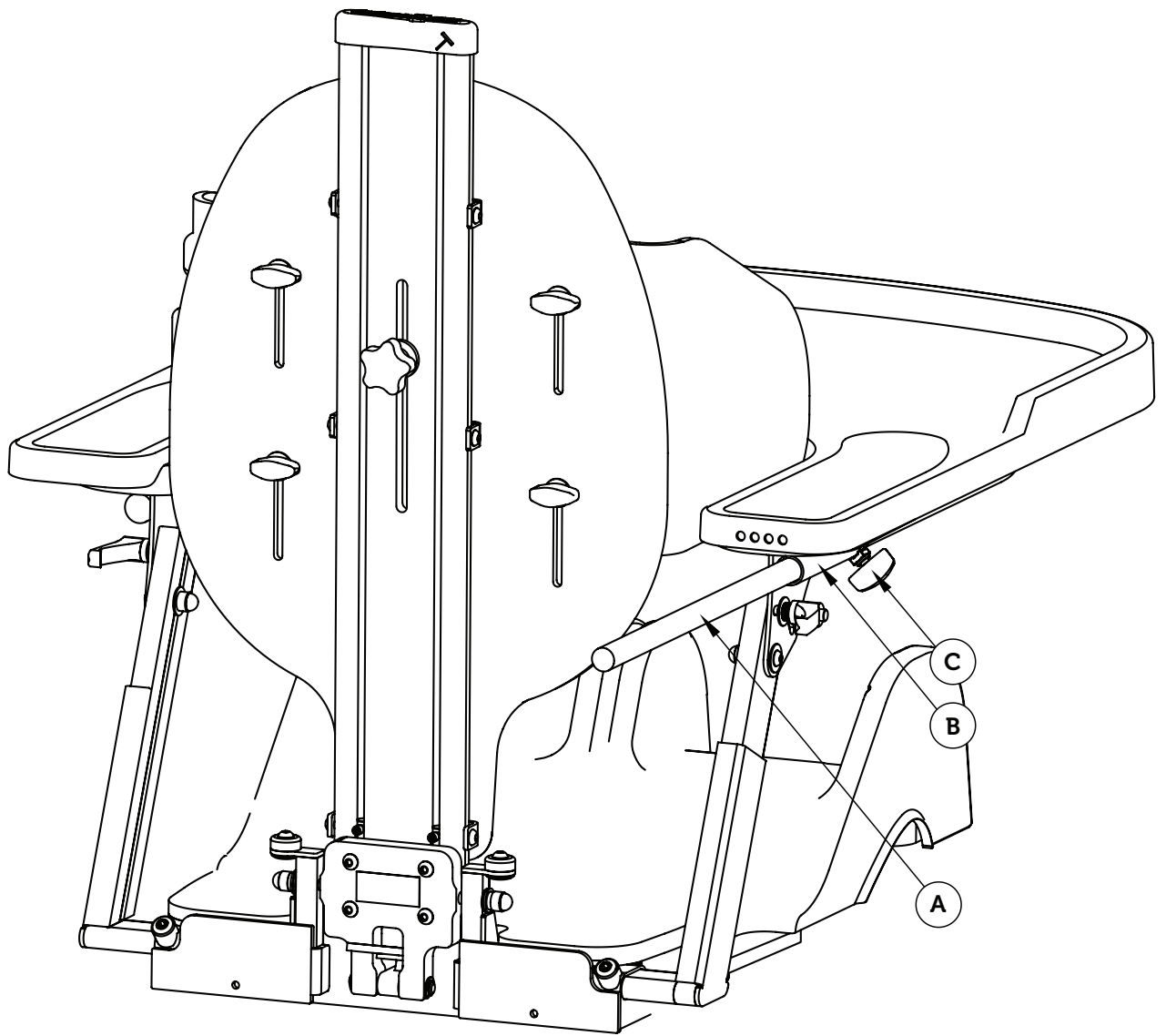

Position 1

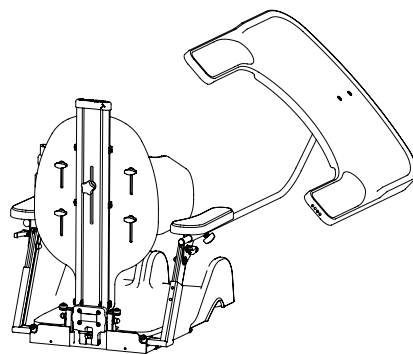

Position 2

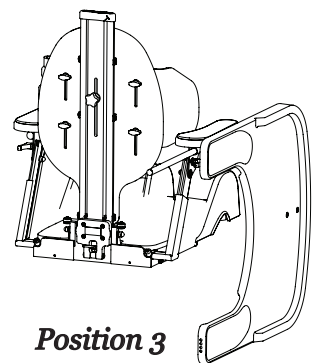

Position 3

Tisch, faltbar

Montage des Tisches

Um den Klapptisch zu montieren, legen Sie das Tischmontage Rohr (A) durch das Rohr (B) unter der Armlehnen-Platte. Schieben Sie den Tisch auf die gewünschte Position und lassen Sie es auf der Armlehnen-Platte ruhen. Ziehen Sie die Flügelmutter (C), um den Tisch zu fixieren.

Nutzung der Faltfunktion

Um den Tisch zur Seite zu klappen, lösen Sie zuerst den Finger Drehknopf (C) leicht. Heben Sie den Tisch an und ziehen Sie ihn nach vorne. Heben Sie ihn nochmals an und ziehen ihn auf die Seite. Wenn der Tisch in seiner untersten Position ist, drücken Sie ihn wieder zurück und drehen Sie Knopf (C) fest.

- 1) Ziehen Sie den Tisch nach vorn
- 2) Heben Sie den Tisch weiter und ziehen ihn auf die Seite
- 3) Wenn der Tisch in seiner untersten Position ist, drücken Sie ihn nochmals nach hinten.


Hinweis!

Denken Sie daran, die Flügelmutter (C) nach Nutzung der Faltfunktion des Tisches an zu ziehen. Wenn Verriegelungshebel verwendet werden, müssen diese unter der Armlehne Platte nach innen gedreht werden, wie auf Seite 34-35

Achtung!

Achten Sie darauf, den Tisch weit genug nach vorne zu ziehen, wenn Sie die Faltfunktion benützen, so dass der Benutzer nicht verletzt wird.

Verstärkter Tisch
Ansicht von unten

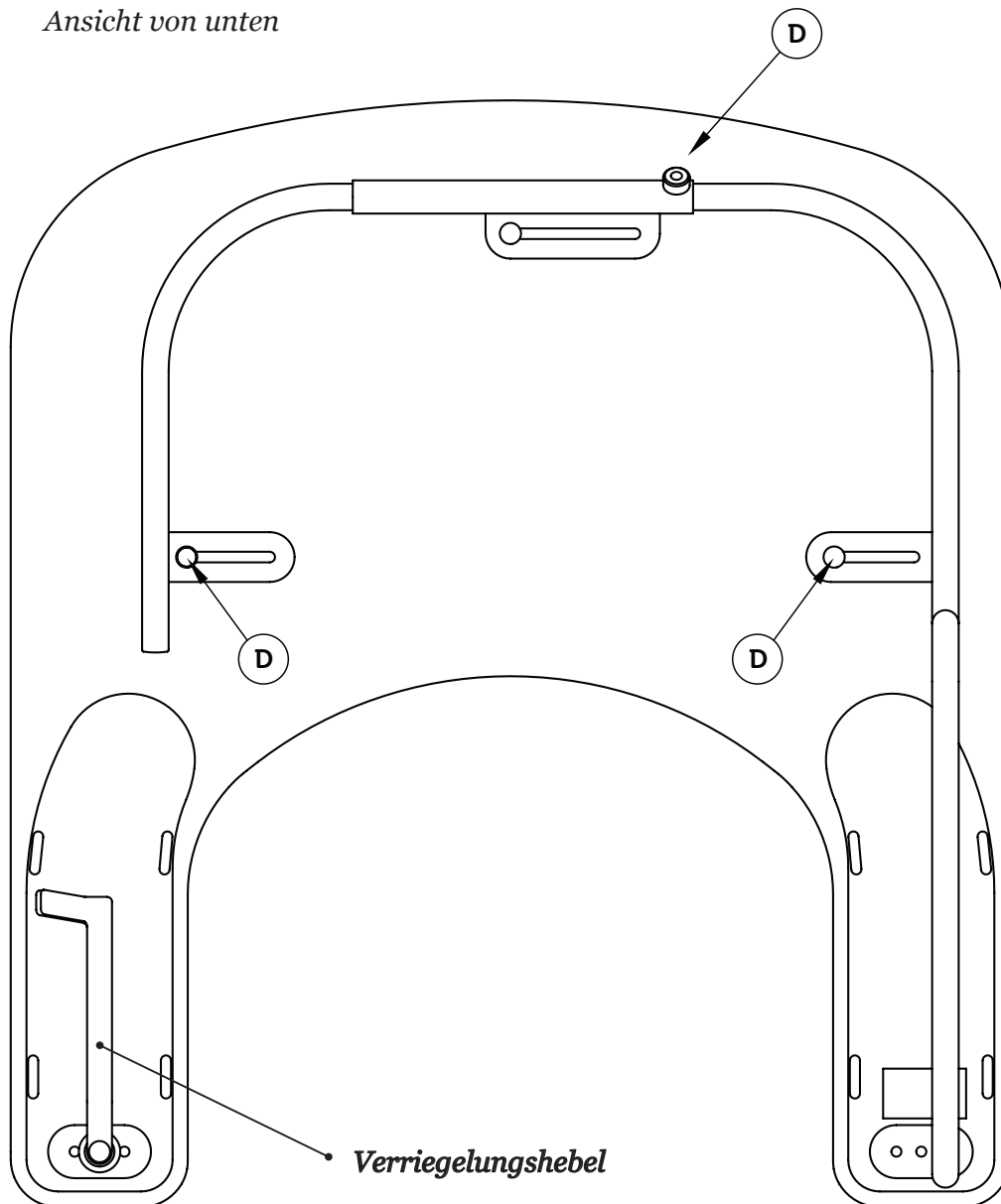

Tisch, verstärkte Halterungen

Montage des verstärkten Tisches


Um den verstärkten Tisch zu montieren, legen Sie das Tischmontage Rohr (A) durch das Rohr (B) unter der Armlehnen Platte. Dann drücken Sie den Tisch in die gewünschte Position und lassen Sie es auf der Armlehnen-Platte ruhen. Ziehen Sie die Flügelmutter (C), um den Tisch zu fixieren.



Breite einstellen

Statt die Breite der Armlehnen einzustellen, können Sie die Breite des Tisches so einstellen, dass die Halterungen in die Montieröhrchen in die Armlehnen Halterung passen. Lösen Sie die Schrauben (D) und bringen Sie die Halterungen in die gewünschte Position. Dann ziehen Sie die Schrauben (D) wieder fest.


Hinweis!

Wenn die Breiten-Anpassung des Tisch nicht ausreichend ist, ist es möglich, die Breite der Armlehne anzupassen. Siehe Seite 22-23 in diesem Handbuch für weitere Informationen.

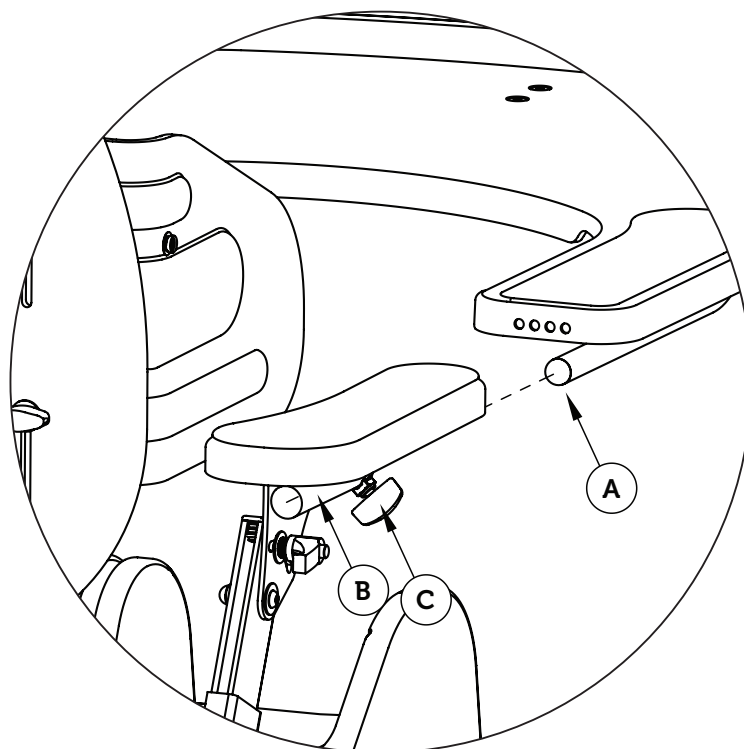

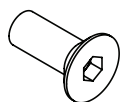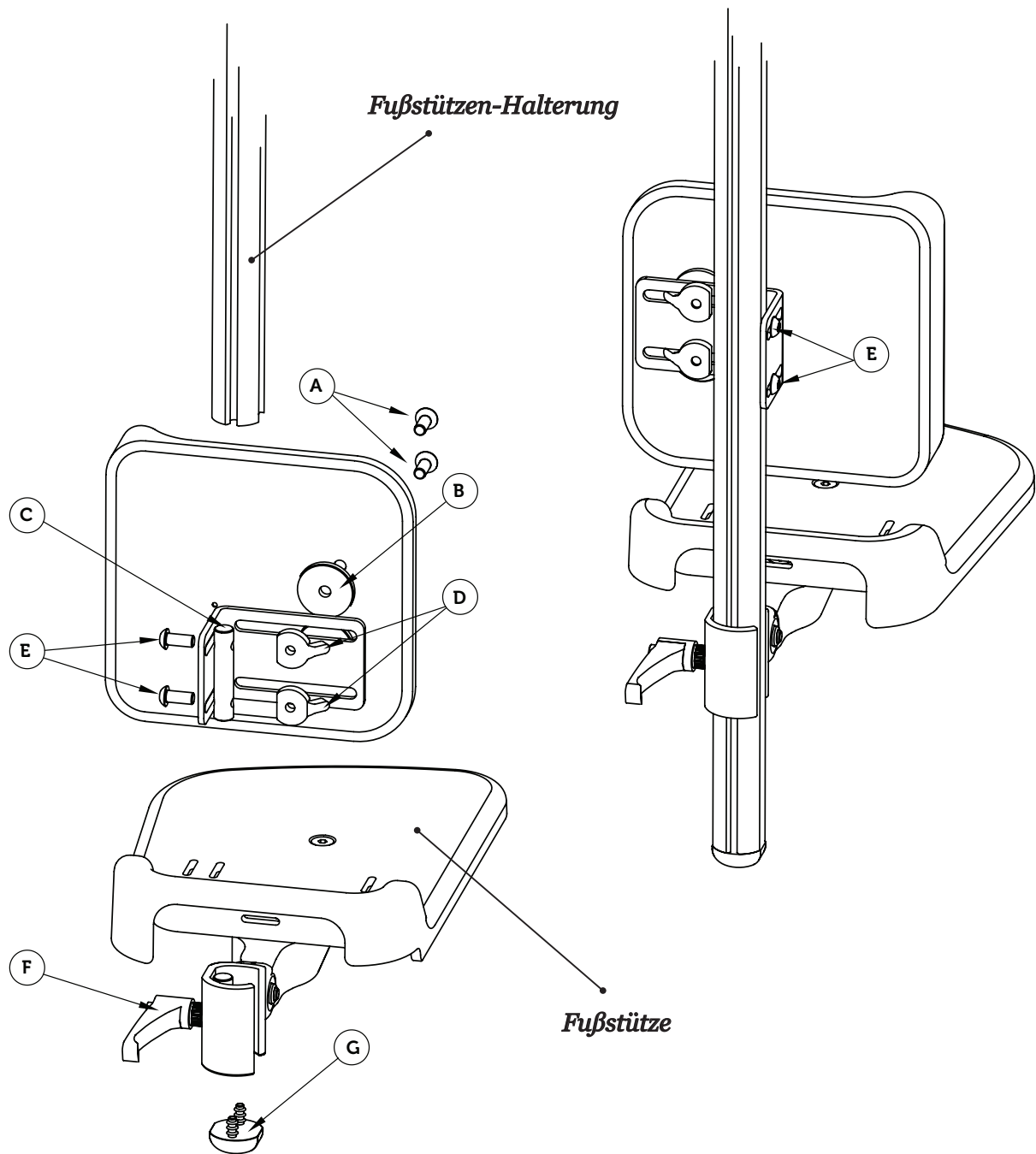


M6 Senkschraube (A)
4 st

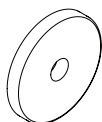


Distanzscheibe (B)
4 st



Schiene Stift (C)
2 st

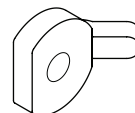

Mutter (D)
4 st

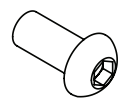

M6 Schraube (E)
4 st

Waden Stütze

Montage der Wadenstütze

Vor der Montage des Wadenstütze, müssen Sie zunächst die Fußstützen aus der Fußstützen-Halterung entfernen. Starten Sie mit die Endkappe (G) und dann lösen Sie den Drehknopf(F), der die Fußstütze auf der Fußstützen Halterung fixiert.

Dann ziehen Sie die Fußstütze nach unten. Montieren Sie die Waden-Stütze, indem Sie die Schienen Stifte (C) in die Fußstützen-Halterung schieben, auf die gewünschte Höhe einstellen und die Schrauben (E) fest ziehen. Bringen Sie die Fußstütze und die Endkappe wieder in den ursprünglichen Stand zurück.

Tipp!

Zur Montage der Fußstütze, siehe Seite 42-43 dieses Handbuchs

Einstellen der Höhe


Um die Höhe der Waden-Stütze einzustellen, lösen Sie die Schrauben (E) leicht und bringen Sie die auf die gewünschte Höhe, dann ziehen Sie die Schrauben (E) fest.

Breite einstellen

Um die Breite der Waden Stütze einzustellen, lösen Sie die Schrauben (E) leicht und bringen Sie sie auf die gewünschte Breite, ziehen Sie dann die Schrauben (E) fest.

Hinweis!

Vergessen Sie nicht, die Fußstütze und die Endkappen nach die Montage des Wadenstützteils wieder zu befestigen

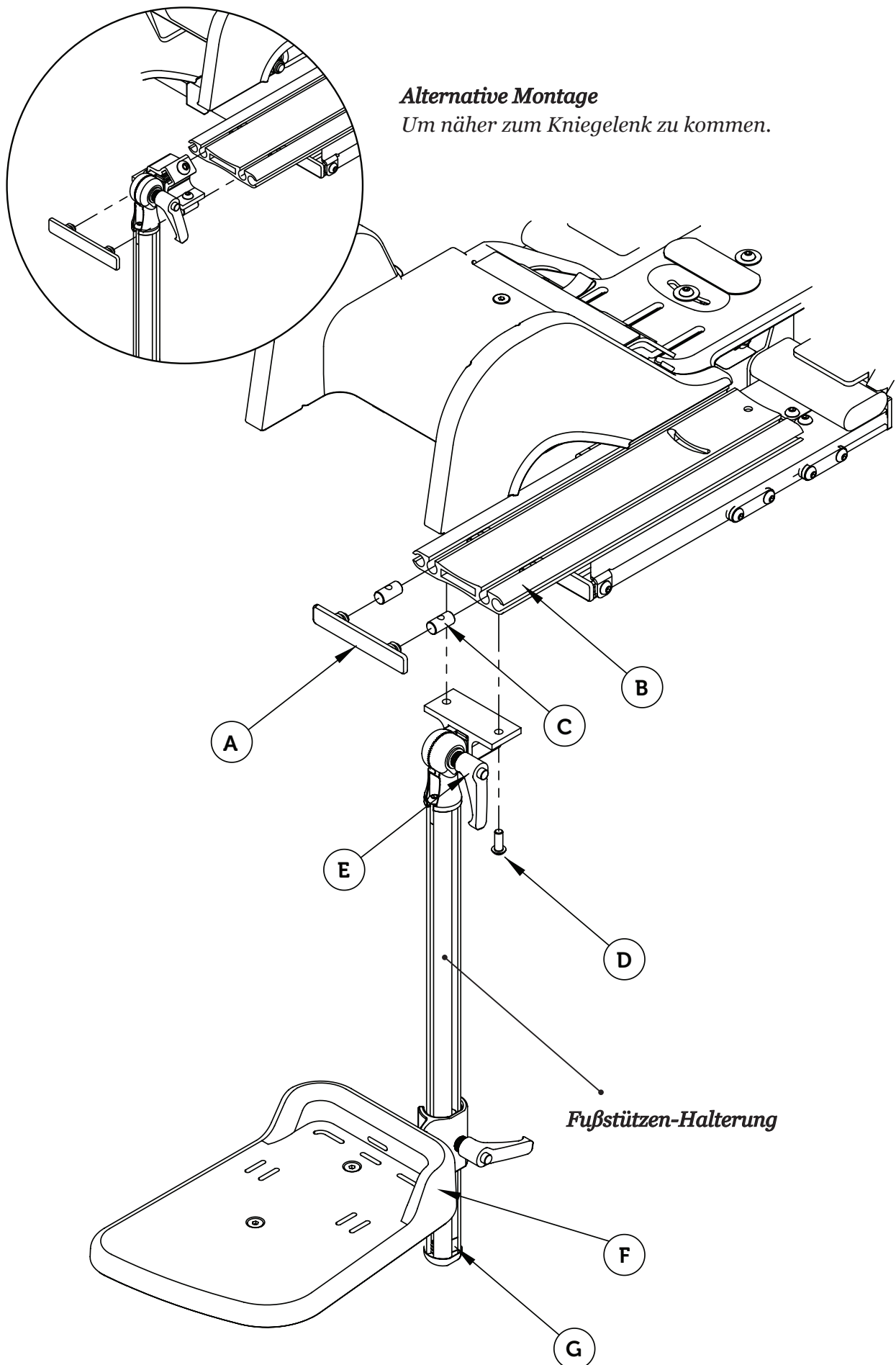

Fußstütze

Montage der Fußstütze

Unabhängig von der Fußstützen-Ausführung erfolgt der Einbau auf gleiche Art und Weise. Starten Sie, indem Sie die Endkappe (A) aus dem Ende des unteren Profils (B) nehmen und schieben Sie dann die Schienen Stifte (C), in die Löchern in das untere Profil (B). Dann befestigen Sie die Fußstütze mit den Schrauben (D) in die Schienen Stifte (C) durch die Löcher im unteren Profil.

Alternative Befestigung der Fußstütze

Um näher zum Kniegelenk kommen, gibt es eine optionale Befestigung wo Sie die Fußstützen auf der gegenüberliegenden Seite des unteren Profils (B) befestigen.

Hinweis!

Beachten Sie, dass Sie das Bein-Teil nicht aus dem Profil nehmen, um die Fußstütze zu montieren.

Sicherheitssperre

Eine Sicherheitssperre (G) in der Form eines Schienen Stifts ist angebracht an der Unterseite der Fußstütze. Der Sicherheitsstopp (G) kann auch verwendet werden, um auf eine vorgegebenen Höhenposition zurückzukehren.

Tipp!


Bringen Sie eine zusätzliche Sicherheit Anschlag oberhalb der Fußstütze an, um die Fußstütze leicht zurück zu bringen in eine alternative Position (z. B. mit oder ohne Schuhe).

Einstellen des Winkels des Kniegelenks

Wenn die Fußstütze auf dem unteren Profil angebracht ist, ist es möglich, den Winkel der Fußstütze dem Kniegelenk anzupassen. Lösen Sie den Hebel Griff (E) und stellen Sie den gewünschten Winkel ein, und ziehen Sie dann den Hebel Knopf (E) wieder fest.

Einstellen des Winkels am Knöchel

Wenn die Fußstütze auf dem unteren Profil angebracht ist, ist es möglich den Winkel der Fußstütze am Knöchel einzustellen. Lösen Sie den Hebel Griff (F) und stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann den Hebel Knopf (F)

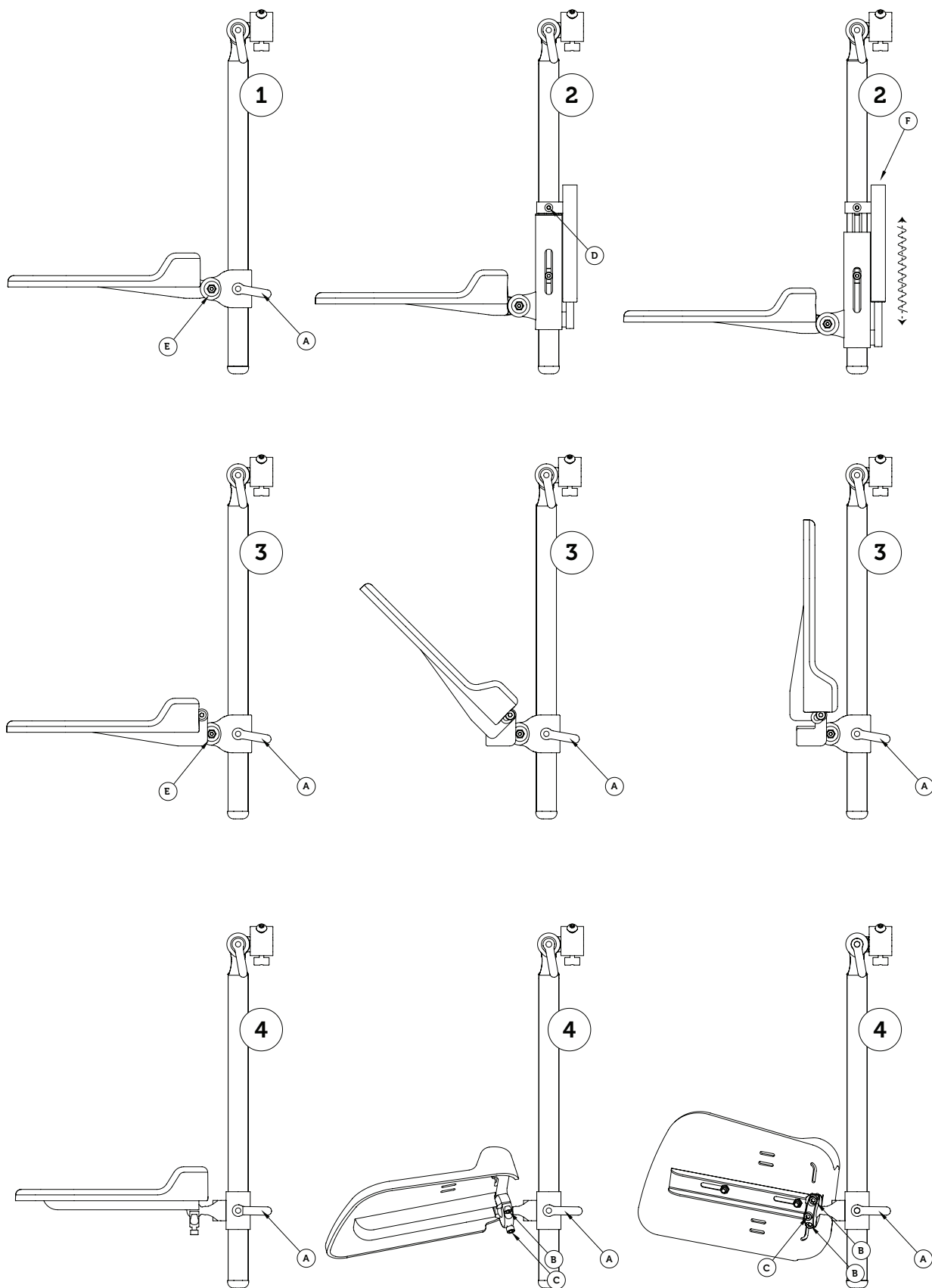

Fußstütze Klammern

Feste Fußstützen-Halterung (1)

Um die Höhe der Fußstütze einstellen, lösen Sie den Drehknopf (A) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein, dann ziehen Sie den Drehknopf (A) fest.

Flexible Fußstützen Halterung (2)

Um die Fußstütze in Höhe zu verstellen, lösen Sie die Schraube (D) und wenn notwendig Schraube (E) und bringen Sie die auf die gewünschte Höhe, dann ziehen Sie die Schraube (D) fest. Wählen Sie die Länge der Federung, und ziehen Sie die Schrauben(E) fest. Benutzen Sie die Schraube (E), um die Feder Amplitude in die richtige Position zu bringen.

Tipp!


Die Federkraft kann mit einer Schraube in der Federanordnung (F) eingestellt werden.

Turn-up Fußstützenaufnahme (3)

Um die Höhe der Fußstütze einzustellen, lösen Sie den Drehknopf (A) und stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie dann den Drehknopf (A) fest. Um die Turn-Up-Funktion zu verwenden, heben Sie die Fußplatte an der Vorseite.

Kugelgelenk Halterung (4)

Um die Höhe der Fußstütze einzustellen, lösen Sie den Drehknopf (A) und stellen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe ein, und ziehen Sie dann den Drehknopf (A) fest. Um die Kugelgelenk Funktion zu nutzen, lösen Sie zunächst die Schrauben (B) und (C) und stellen sie diese auf die gewünschte Position ein. Dann ziehen Sie die Schrauben (B) fest und sichern Sie die Position mit der Schraube (C).

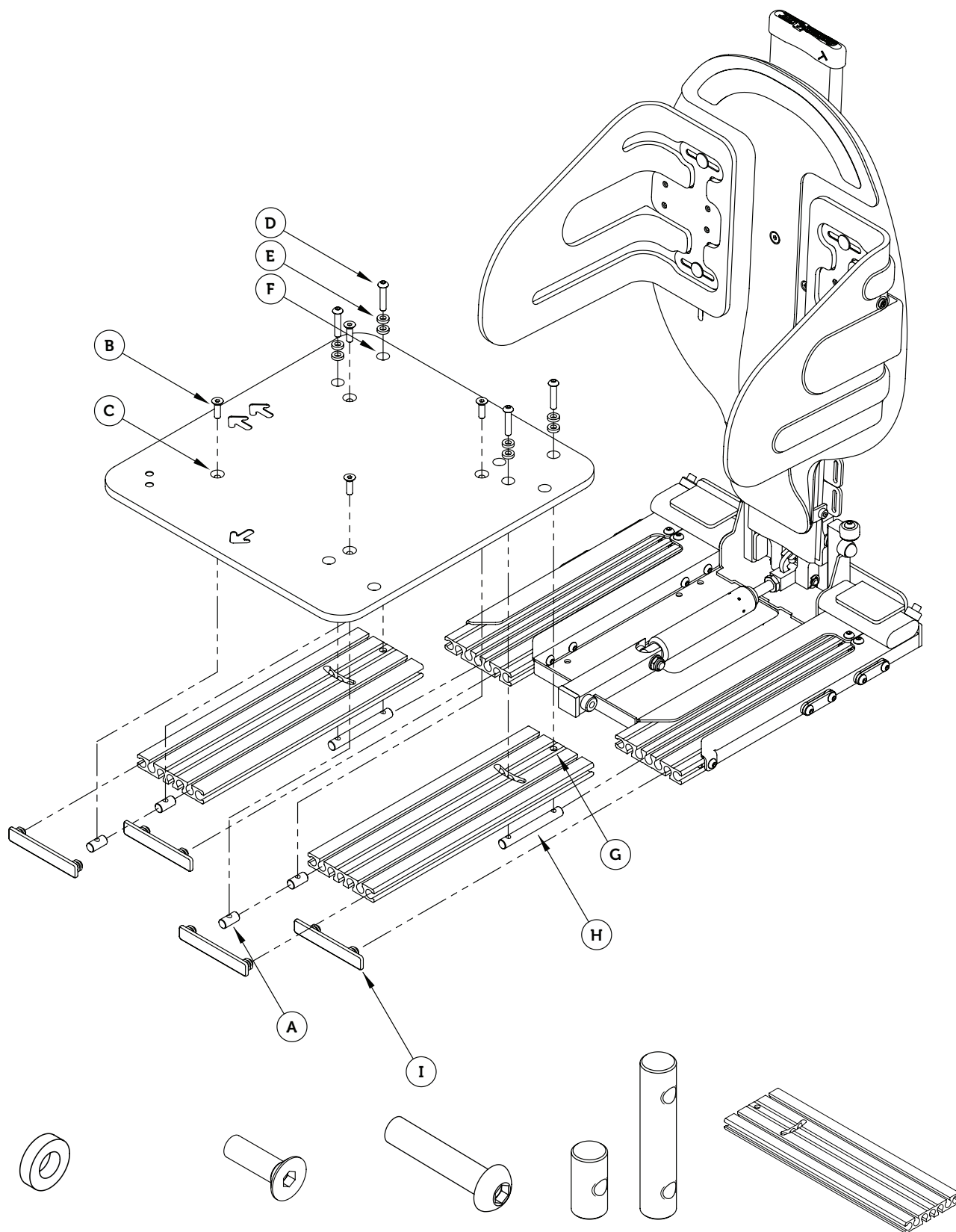

M6x3 Distanzscheibe
8 st

M6x16 Senkkopf
4 st

M6x35
4 st

Schiene Stiften
4 st / 2 st

Profile
2 st

Flacher Sitz

Montage des flachen Sitz

Bei der Montage des flachen Sitzes, werden die Standard-Sitz Teile durch eine flache Sitzfläche ersetzt. Die Montage des flachen Sitz muss mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial entsprechend der Beschreibung unten erfolgen.

Bei der Montage des flachen Sitzes, sollten die größeren Schrauben (A) durch die hintersten Bohrungen (B) in der flachen Sitzplatte und die Löcher (C) in dem Profil gedreht werden.


Verbinden Sie diese auf der gegenüberliegenden Seite mit den Schienen Stiften (D). Nicht ganz festziehen. Legen Sie die Schiene Stiften (E) in den äußersten Spuren des Profils und befestigen Sie die Schrauben (F) in diese, durch die Löcher (G) in der flachen Sitzplatte.

Schieben Sie die Schiene Pins Für die Montage der flachen Sitzplatten in die Sitzfläche in Spur 1 (siehe Seite 12) in die gewünschte Position, und ziehen Sie die Schrauben (A) fest.



Hinweis!


Verwenden Sie keine anderen Schrauben als die mitgelieferten. Dies sind Sicherheits-Maßnahmen. Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Anatomic SITT AB.

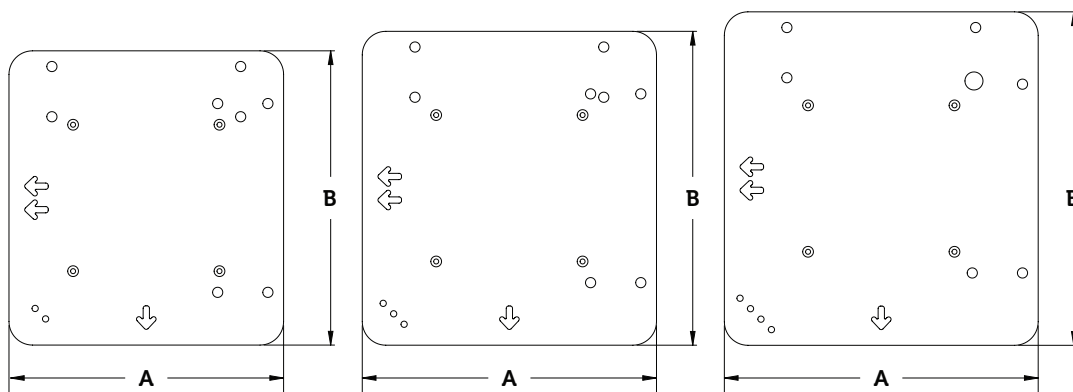

Flacher Sitz
Artnr. 153190
(AxB)
350 x 375 mm

Flacher Sitz
Artnr. 153191
(AxB)
375 x 400 mm

Flacher Sitz
Artnr. 153192
(AxB)
400 x 425 mm

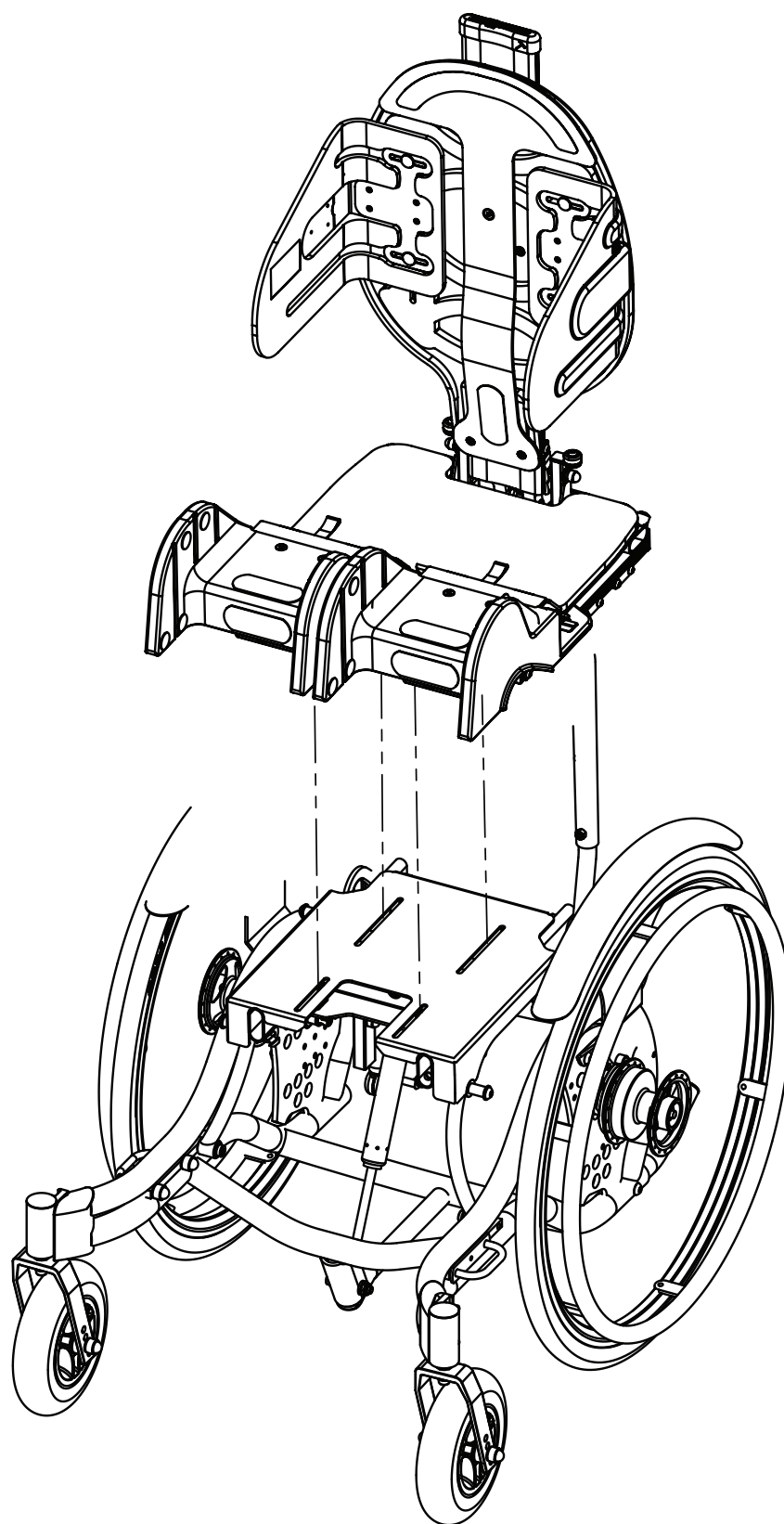

Montage eines Sitzsystem auf einem Rahmen

Montage auf einem Rahmen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ein Sitzsystem auf einem Rahmen zu montieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Optionen erklärt. Wählen Sie die Methode, die Ihnen am besten zusagt.

Festeinbau

Festeinbau bedeutet, dass Sie das Sitzsystem direkt auf dem Rahmen befestigen. Bei dieser Methode muss die Montage mit dem mitgelieferten Montage-Kit vorgenommen werden. In der Unterseite des Sitz-Systems sind zwei verschiedene Bohrbilder für die Befestigung an einem Rahmen. Wählen Sie das Lochmuster, das für eine Montage am ausgewogensten ist.




Hinweis!

Verwenden Sie keine anderen Schrauben als die mitgelieferten. Das sind Sicherheits-Maßnahmen Falls andere Abmessungen erwünscht sind, wenden Sie sich bitte an Anatomic SITT AB.

Hinweis!

Wenn Sie einen flachen Sitz verwenden, muss dieser zuerst vor der Montage vom Gestell entfernt werden.

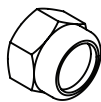


M6 Kontermutter (C)

4 st




M6 Unterlegscheibe (B)

4 st

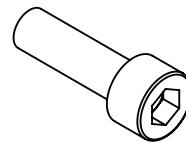

M6 Schraube (A)

4 st

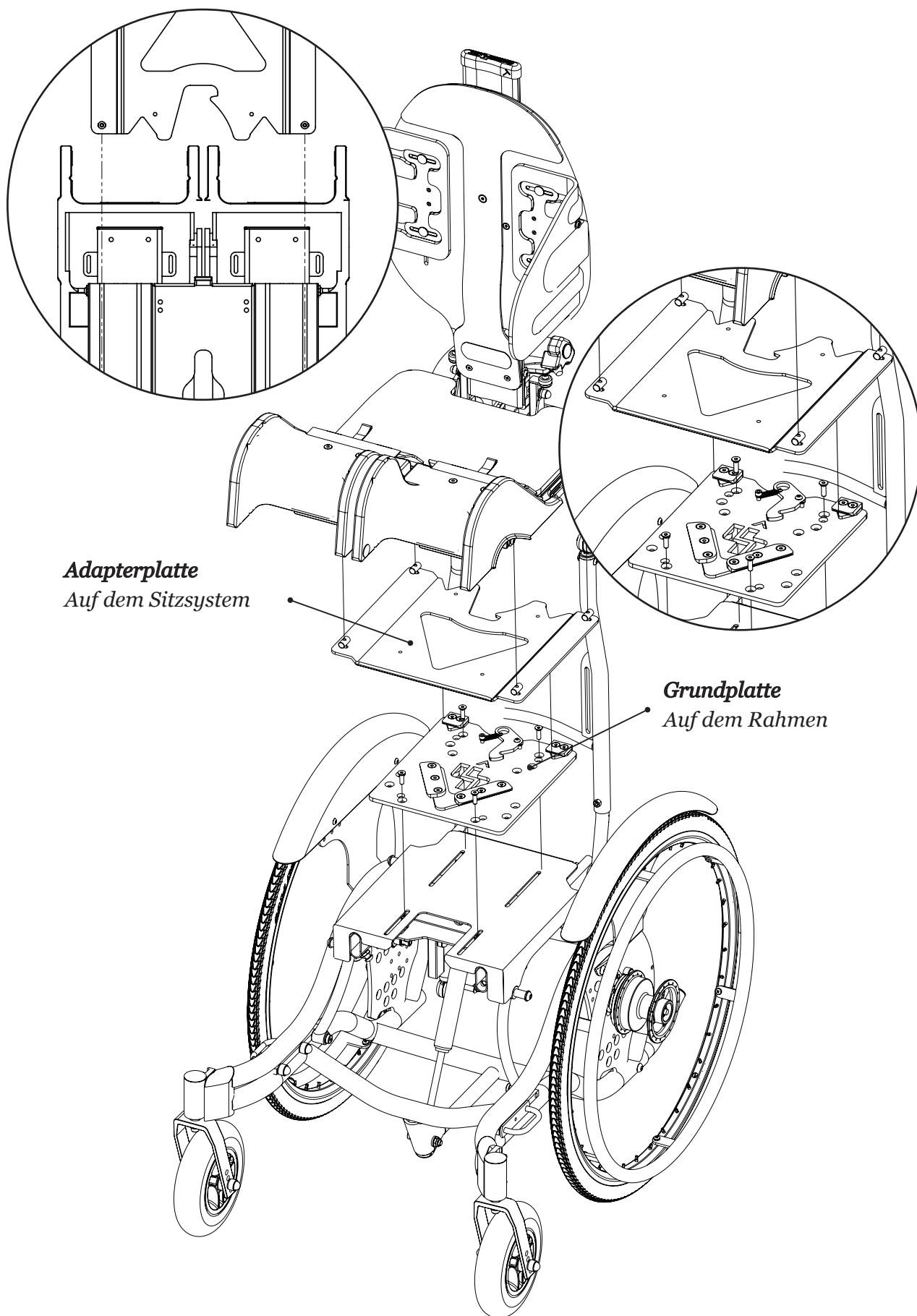

Montage eines Sitzsystem auf einem Rahmen

Montage auf einem Rahmen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ein Sitzsystem auf einem Rahmen zu montieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Optionen beschrieben.

Montage mit einem Adapter-System

Ein Adapter ermöglicht die einfache Bewegung des Sitz-Systems zwischen verschiedenen Untergestellen. Das Adapter-System besteht aus einer Adapterplatte auf dem Sitz und einer Grundplatte auf jedem Rahmen.


Beginnen Sie mit der Montage der Bodenplatte auf dem Rahmen durch Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Dann montieren Sie die Adapterplatte, mit den Schienen Stiften (A) in die äußersten Spuren am Boden des Sitzsystem. Ziehen Sie die Schrauben (B) fest, wenn die gewünschte Position erreicht ist.

Wenn beide Platten angebracht sind, können diese kombiniert werden. Das Sitzsystem ist ordnungsgemäß gesichert, wenn Sie ein Klicken hören.




Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass das Sitzsystem vor der Verwendung sicher am Rahmen befestigt ist.

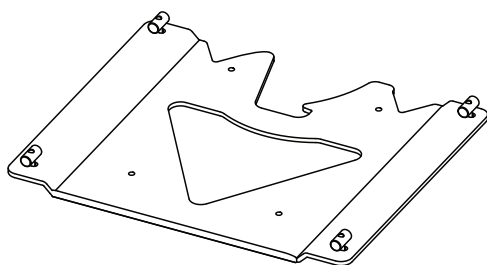

Adapterplatte

Am Sitzsystem angebracht

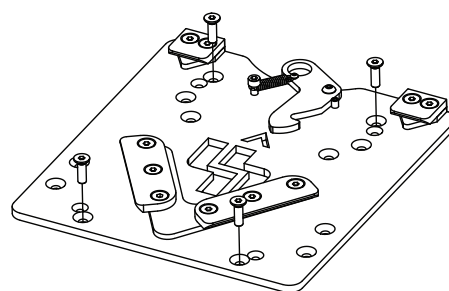

Grundplatte

Am Rahmen

Transport in einem Fahrzeug

Richtlinien für den Transport in einem Auto


Beim Transport eines Sharky Pro in einem Auto, auf den Rahmen montiert, müssen die Anweisungen des Rahmen Herstellers befolgt werden.

Wenn Sharky Pro auf Seabass Pro montiert ist sollte der Rahmen in den vorgesehenen Transport Klammern befestigt werden, wie unten gezeigt.



Hinweis!

Es ist wichtig, dass Sie den Riemen nicht überspannen. Überspannung der Riemen kann den Rahmen verbiegen.

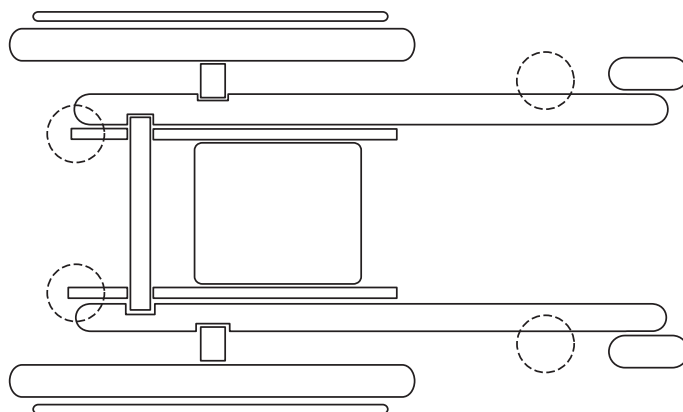

Crashtest geprüft und zugelassen

Sharky Pro ist Crash getestet und nach ISO 16840-4 zugelassen. Diese Norm bestätigt, dass das Sitzsystem auf allen Rahmen, die nach ISO 7176-19 zugelassen sind, unter Beibehaltung ihrer Zulassung für die Kombination, montiert werden können.

Hinweis!

Crashtest Die Zulassung gilt für Gewichte bis zu 75 kg

Kundendienst

Scandinavia

SE

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicstitt.com

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

NO

Anatomic SITT Hjelpmiddelspesialisten AS

Litleåsveien 41, Postboks B 92, N-5871 Bergen
Tel. +47 55 392 080, Fax +47 55 392 090

FI

Handico Finland OY

Asemanaukio 7, FIN-04200 Kerava
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

NO

Hjelpmiddelspesialisten A/S

Rosenholmsveien 22, N-1252 Oslo
Tel. +47 66 81 60 70, Fax +47 66 81 60 71
Email firmapost@hm-spes.no

Europe

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicstitt.com

MLT

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

GBR

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

NZL

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

GR

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

EST

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

IRL

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

PRT

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

FR

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmíðin

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjörður
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

UAE

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

AUS

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

ISR

Special needs for Special children

48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

MYS

The Gym & Care

1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

Pflegeanleitung

Wartungsintervalle

Damit das Gerät richtig funktioniert, müssen regelmäßige Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden. Die Notwendigkeit für Service hängt ab von der Häufigkeit der Nutzung und vom Verschleiß. Überprüfen Sie alle beweglichen Teile und Verbindungselemente auf Verschleiß. Reparaturen sollten immer von professionellem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Wenn Sie unsicher sind, verwenden Sie sich bitte an Anatomic SITT AB.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Kunststoff- und Metallteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, oder mit antibakteriellen Flüssigkeiten oder ähnlichem gewaschen werden. Denken Sie an die Umwelt und verwenden sie biologisch abbaubare Reinigungsmittel.

Kissen, Stoffe und Gürtelkissen können bei 60 ° Grad Feinwäsche gewaschen werden und dürfen nicht geschleudert werden, können aber in einem Trockenschrank getrocknet werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem jeweiligen Wäsche Etikett. Die gleichen Regeln gelten für das Waschen der Positionierungsurte und der Hüftgurte von Anatomic SITT AB.

Überprüfen Sie den Zustand regelmäßig und führen Sie Wartungsarbeiten durch wenn nötig.

Der Gas Kolben muss regelmäßig aktiviert werden

Gas Kolben sollten regelmäßig benutzt werden, um ihre Funktion aufrecht zu erhalten. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte der Gas Kolben mindestens einmal alle 6 Monate aktiviert werden. Ferner sollten sie mit nach unten gerichteter Kolbenstange aufbewahrt werden. Andernfalls könnte das Gasfeder-Siegel kaputt gehen und die Funktionsfähigkeit des Gas Kolbens behindern.

Werkzeuge

Das Werkzeug (4 mm Inbusschlüssel) dass Sie benötigen um Anpassungen vorzunehmen, ist auf dem Stuhl in der die Oberseite des Profils der Rückenlehne integriert.

Garantie

1 Jahr auf Fabrikationsfehler. Weitere detaillierte Informationen über die Garantie die wir bieten, finden Sie auf Seite 58 dieser Anleitung.

Kombinationen

Zitzi Sharky Pro und sein Zubehör sind CE-zertifiziert Produkte, die mit allem Zubehör in diesem Handbuch beschriebenen kombiniert werden können. Zitzi Sharky Pro eignet sich für den Einsatz zusammen mit Untergestellen wie Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro, Mika und Flizzy. Für andere Kombinationen kontaktieren Sie bitte Anatomic SITT AB.

Ersatzteile

Für eine gültige CE-Kennzeichnung der Zitzi Sharky Pro, kann das Sitzsystem nur mit Ersatzteilen durch Anatomic SITT AB geliefert montiert werden.

Abänderungen

Abänderungen der Sitzsystem dürfen nur mit Originalteilen von Anatomic SITT AB vorgenommen werden.



Hinweis!

Überprüfen Sie immer, dass das Gerät nicht abgeändert wurde bevor es an neue Benutzer gesendet wird.

Kennzeichnung

Zitzi Sharky Pro und sein Zubehör sind CE gekennzeichnete Produkte. Eine eindeutige Seriennummer befindet sich auf einem Etikett, plaziert unter dem Aktivierungs Gehäuse. Diese Seriennummer sollte in jeder Korrespondenz bezüglich des Produktes angegeben werden.

Recycling

Ein gebrauchtes Teil oder Produkt sollte demontiert und entsorgt werden. Die Teile sollten nach Materialart, Metall, Kunststoff und Brennstoffe (Textilien) getrennt werden. Der Gas Kolben sollte als gefährliches Material sortiert werden.

Zusammenfassung und Follow-ups

Befolgen Sie durchgehend alle Punkte bei einer Kontrolle . Bei jeder Verwendung des Sitzsystems durch einen Patienten, sollten alle Punkte überprüft werden.

- Führen Sie regelmäßig die Follow-ups aus, die in dem jeweiligen Punkt beschrieben sind.
- Regelmäßig prüfen, dass alle Schrauben fest gezogen sind.
- Regelmäßig den Verschleiß der Gurte und Polster prüfen.
- Stellen Sie das Kind nicht in den Sitz, bevor Sie das Klick-Geräusch hören, wenn der Sitz auf ein Untergestell montiert wird.
- Neigen Sie den Sitz nicht zu weit nach vorne, wenn das Kind in den Sitz gesetzt wird.

Anpassung und Individualisierung

Richtlinien und Empfehlungen

Jedes Mal, wenn die Pro Sharky in irgendeiner Weise verändert wird, soll eine Einschätzung vorgenommen werden, um festzustellen, ob es sich um eine Anpassung oder eine Individuelle Anpassung handelt.

Eine Anpassung ist eine Änderung die im Einklang mit der CE-Kennzeichnung vorgenommen wurde.

Alle anderen Änderungen sind individuelle Anpassungen. Individuelle Anpassungen dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die für die Aufgabe qualifiziert sind und sollte immer in einer professionellen Art und Weise gemacht werden.

Das CE-Zeichen bedeutet, dass das Produkt alle wesentlichen europäischen Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Beachten Sie, dass immer eine Risikobewertung für eine Anpassung sowie für eine Individuelle Anpassung einer medizinischen Hilfe durchgeführt werden soll. Das Produkt darf niemals gefährlich werden nach Anpassung.

Das Produkt ist mit einem Vermerk gezeichnet, dass es für einem bestimmten Benutzer angepasst ist, so dass es nicht mit einem Standard-Modell Produkt wechselt werden kann.

Erlaubte Anpassungen der Pro Sharky

Beachten Sie, dass immer eine Risikobewertung für eine Anpassung sowie für eine Individuelle Anpassung einer medizinischen Hilfe durchgeführt werden soll. Das Produkt darf niemals gefährlich werden nach Anpassung.

Verkürzung der Fußstützen-Profile

Das Fußstützen-Profil kann verkürzt werden, um dem Benutzer besser zu passen.

Verkürzung/Abschneiden der Armlehnen-Profile (Armlehne vom Sitz)

Das Armlehnen-Profil kann verkürzt werden, um dem Benutzer besser angepasst zu sein. Das Profil muss nur am unteren Ende abgeschnitten werden (in Richtung des Sitzes) und M5 Löcher für die Sicherheits-Stopper müssen gebohrt werden. Diese Löcher müssen so gebohrt werden, dass der Sicherheits-Stopper in der Spur des Profils in einem Mindestabstand von 10 mm zum Profil Ende montiert werden kann.

Verkürzen/Abschneiden des Rückenlehnen-Profils

Das Rückenlehnen Profil kann verkürzt werden, um dem Benutzer besser angepasst zu werden. Das Profil darf nicht zu kurz sein, so dass alle Rückenlehnen Klammern darauf montiert werden können. Außerdem muß immer mindestens 10 mm zwischen dem Ende des Schlitzes für Lordosenstütze und dem Ende des Profils vorhanden sein.

Geschäftsbedingungen

Garantie

Garantie gegen Fertigungsfehler ist gültig für ein (1) Jahr ab Lieferdatum. Garantie erlischt, wenn das Produkt externen Faktoren oder unachtsamer Behandlung unterzogen wurden. Es ist erforderlich, dass das fehlerhafte Produkt zurückgegeben wird um einen Garantieanspruch zu verarbeiten. Fügen Sie immer den Lieferschein der ursprünglichen Lieferung zu.

Gewährleistungsansprüche

Beschreiben Sie den Fehler und die mögliche Ursache dafür so gründlich wie möglich. Fordern Sie Reparaturen oder Ersatz gemäß der Gewährleistung. Schließen Sie immer eine Kopie der Rechnung dabei und erklären Sie, dass das Produkt, nach der Reparatur, zurück geschickt werden soll. Geben Sie eine Lieferadresse, einen Ansprechpartner und eine Telefonnummer.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gut verpacken, um es vor Erschütterungen während des Transports zu schützen. Beachten Sie die Sendungsnummer in Ihrer Dokumentation. Dies ist nötig, um die Sendung beim Transport zu verfolgen.

Rücksendung von Produkten

Im Falle einer fehlerhaften oder falsche Lieferungen, sollten die Produkte innerhalb von 20 Tagen nach Lieferung zurückgegeben werden. Immer eine Kopie von sowohl dem Lieferschein als auch der Rechnung beifügen. Geben Sie Ihren Grund für die Rücksendung der Produkte an.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gut verpacken, um es vor Erschütterungen während des Transports zu bewahren. Beachten Sie die Sendungsnummer in Ihrer Dokumentation. Dies ist nötig, um die Sendung während des Transports verfolgen zu können.

Für Produkte, mehr als 20 Tage ab Lieferung, Retour

eine Erstattung von 80% des Rechnungsbetrages wird gemacht

Für Produkte, mehr als 60 Tage ab Lieferung, Retour

eine Erstattung von 60% des Rechnungsbetrages wird gemacht

Für Produkte, mehr als 150 Tage ab Lieferung, Retour


eine Erstattung von 40% des Rechnungsbetrages wird gemacht

Für Produkte, mehr als 360 Tage ab Lieferung, Retour

Wird keine Erstattung des Rechnungsbetrages gemacht.

▲ Kundenspezifische Produkte können nicht zurückgegeben werden

Technische Daten

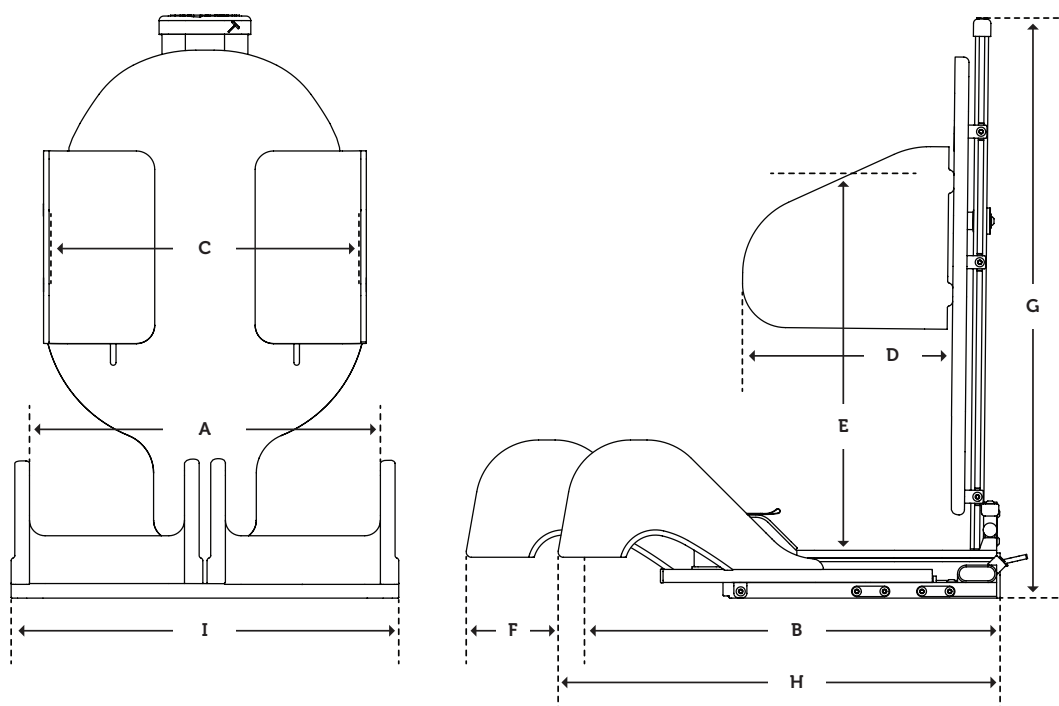

Benutzer-Daten	Größe 1	Größe 2
Benutzer Länge	150–180 cm	170–195 cm
Sitzbreite (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Sitztiefe (B)	37–47 cm	45–55 cm
Seitliche Breite (C)	27–35 cm	30–38 cm
Lateral Tiefe (D)	21 cm	25 cm
Achselhöhe (E)	35–50 cm	40–55 cm
Beinlängendifferenz (F)	10 cm	10 cm
Abduction/Adduction	18° / 9°	18° / 9°
Produktdaten	Größe 1	Größe 2
Benutzer Breite	130 kg*	130 kg*
Höhe (G)	67 cm	77 cm
Länge (H)	52–62 cm	62–72 cm
Breite (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Gewicht	14 kg	
Rückenwinkel	-10° / +25°	-10° / +25°

* Crashtest Die Zulassung gilt für Gewichte bis zu 75 kg

Diese Produkt ist hergestellt durch Anatomic Sitt AB

Postfach: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06

Norrköping

Adresse: Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1,
SE-603 61 Norrköping Norrköping.

Verteilung durch Anatomic Sitt Benelux und Deutschland

Telefon: 0031 344 634540

Fax: 0031 344 623361

Email: informatie@anatomicsitt.com

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

